


# Lynvejledning: Brug af Cyclo G6®-laseren med sweep-styringssoftware og MicroPulse P3®-laseranordningen\*





1 Drej nøglen til positionen "ON" (Tændt). Vent på, at initialiseringen fuldføres. Tilslut MicroPulse P3-proben.

4 **Indstilling af behandlingsparametre**  
Indstil parametre ved hjælp af Preset Menu (Forudindstillingsmenu) eller ved manuel indtastning.

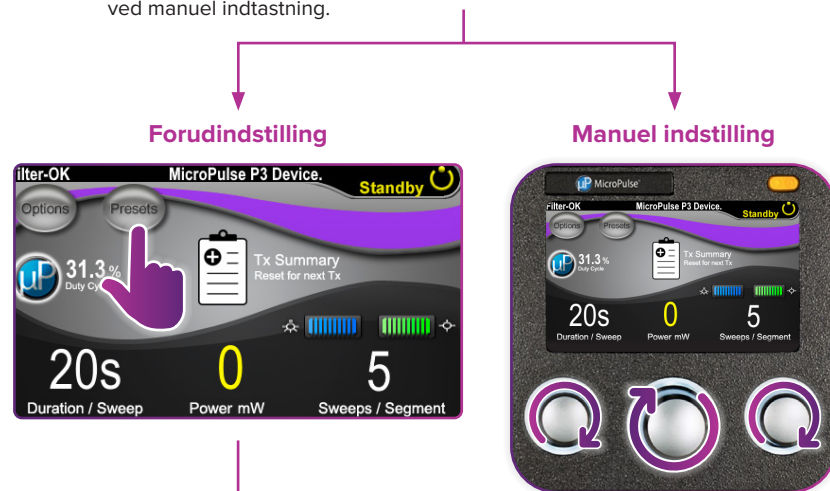


Forudindstilling

Manuel indstilling

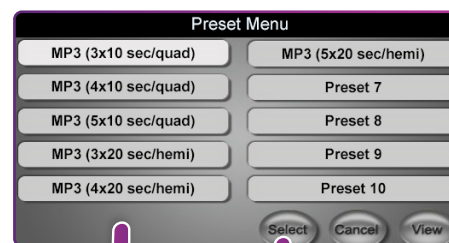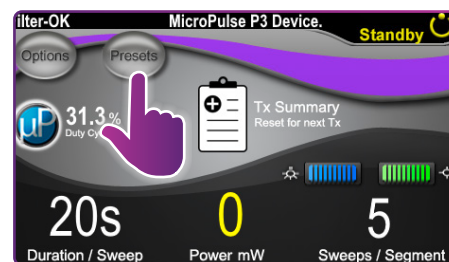

SE FLERE TRIN PÅ BAGSIDEN

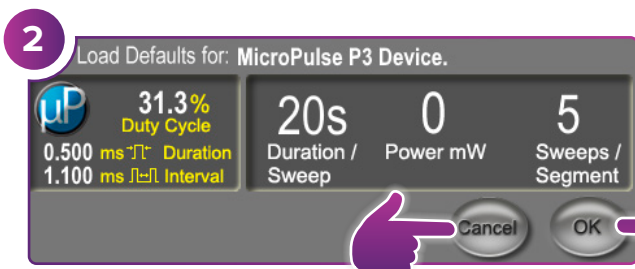

2 Vælg "OK" for at indstille nye parametre. Der vises en pop op-skærm (trin 3).


Vælg "CANCEL" (Annuller) for at beholde parametrene fra den forrige behandling. Der vises en pop op-skærm (trin 3).




3 Tryk på "OK". Gå til trin 4 for at indstille nye parametre. Gå til trin 5 for at beholde dine parametre.




\* Før du afgiver behandling, skal du se "Softwarevejledning: Cyclo G6-softwareopgradering til MicroPulse TLT", "Brugervejledning til Cyclo G6-lasersystemet" og "Brugervejledning til MicroPulse P3-laseranordning" for at få instruktioner i afgivelse, herunder sikkerhed, advarsler og forholdsregler.

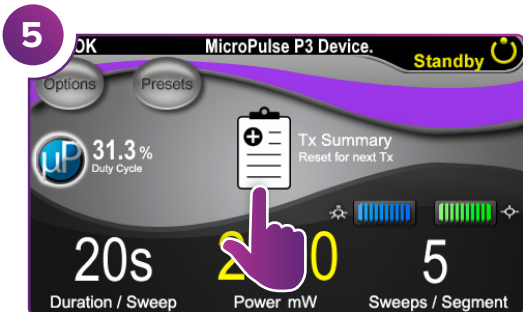


Vælg "Tx Summary" (Behandlingsoversigt).

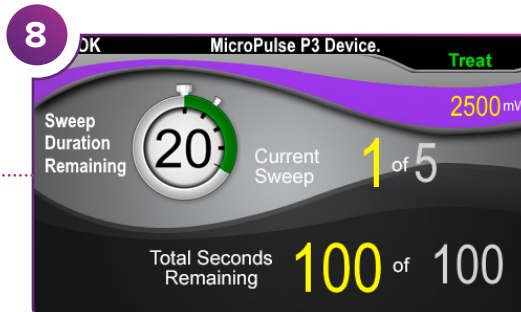


Afgiv behandling i det ønskede segment.

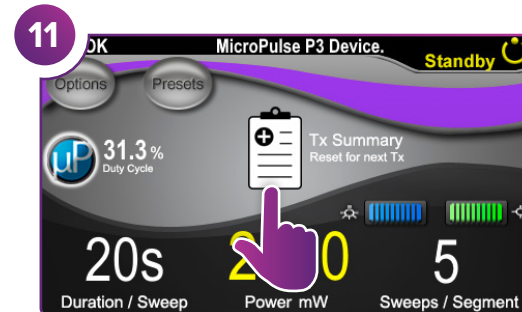


Tryk på ikonet for at få vist behandlingsoversigten.

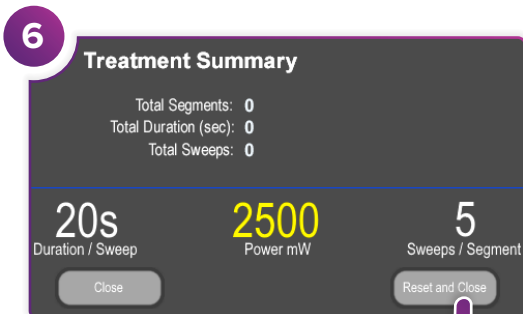

Kontrollér, at værdierne i "**Total Segments**" (Samlet antal segmenter), "**Total Duration**" (Samlet varighed) og "**Total Sweeps**" (Samlede sweeps) nulstilles.

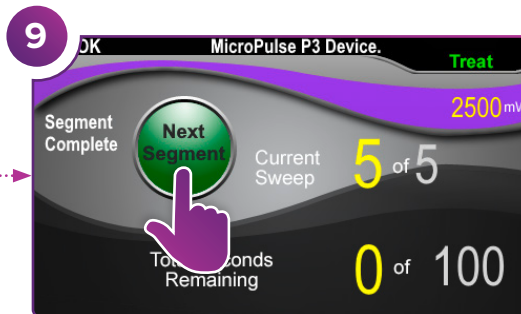

Tryk på denne knap for at nulstille værdierne. Hvis du vil behandle det næste segment, skal du gentage trin 8. Når behandlingen er fuldført, skal du fortsætte til trin 10.

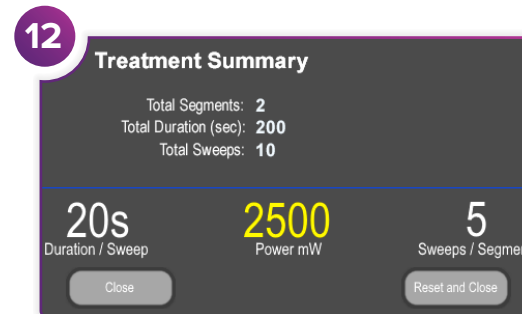


Gennemgå behandlingsoversigten.




Tryk på denne knap for at skifte til tilstanden Treat (Behandl).



Når behandlingen er fuldført, skal du trykke på denne knap for at skifte til standbytilstand (deaktiver laser).

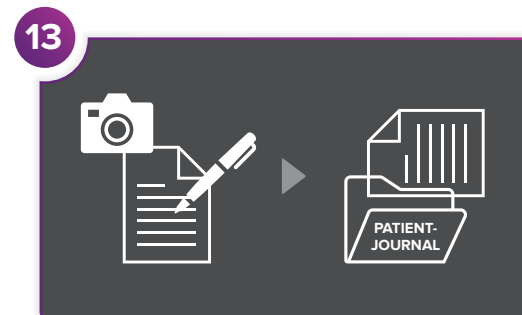

Registerer behandlingsoplysninger.

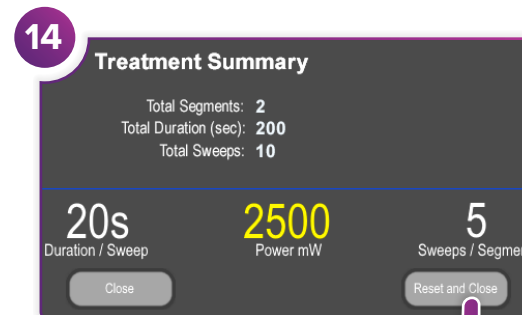

Nulstil for næste behandling.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com  
 © 2022 Iridex. Alle rettigheder forbeholdes. Iridex, Iridex-logoet, MicroPulse, MicroPulse P3 og Cyclo G6 er registrerede varemærker tilhørende Iridex. 88305-DA.A 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe  
 Prinsessegracht 20  
 2514 AP The Hague  
 Holland

