


Guide rapide : utilisation du système laser Cyclo G6® avec le logiciel de gestion du balayage et le système d'émission MicroPulse P3®*



1 Tournez la clé en position « ON » (MARCHE). Attendez que l'initialisation se termine. Connectez la sonde MicroPulse P3.

4 **Sélection des paramètres de traitement**
Définissez les paramètres à l'aide du menu Preset (Préréglages) ou par saisie manuelle.

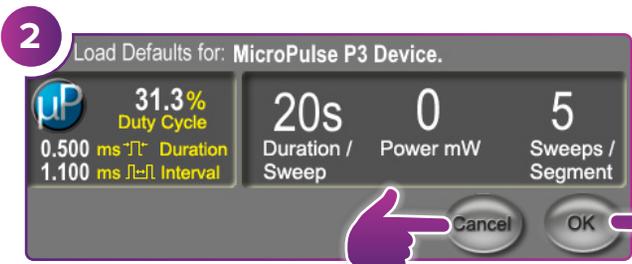

2 Sélectionnez « OK » pour définir de nouveaux paramètres. Un écran contextuel s'affiche (étape 3).

Sélectionnez « CANCEL » (ANNULER) pour conserver les paramètres utilisés pendant le traitement précédent. Un écran contextuel s'affiche (étape 3).




VOIR VERSO POUR PLUS D'ÉTAPES




3 Appuyez sur « OK ». Pour définir de nouveaux paramètres, passez à l'étape 4.
Pour conserver vos paramètres, passez à l'étape 5.




* Avant d'administrer le traitement, consultez « Manuel d'utilisation : mise à niveau du logiciel Cyclo G6 pour TLT MicroPulse », le manuel d'utilisation du système laser Cyclo G6 et le mode d'emploi du système d'émission MicroPulse P3 pour les instructions d'émission, notamment les consignes de sécurité, mises en garde et avertissements.

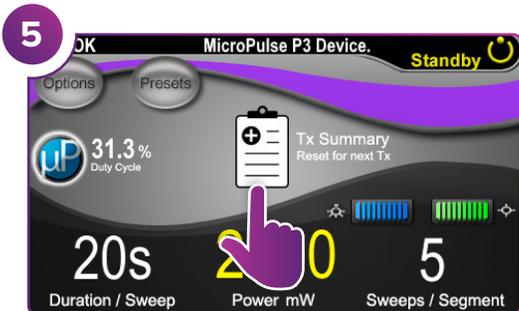

Sélectionnez « Tx Summary » (Résumé du traitement).

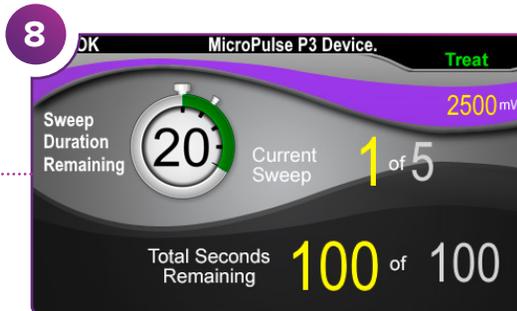


Administrez le traitement sur le segment désiré.

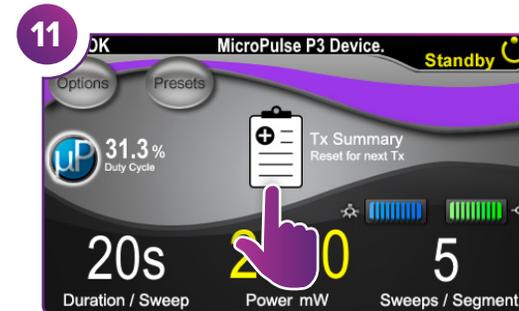


Appuyez pour afficher le résumé du traitement.



Confirmez la remise à zéro des valeurs « Total Segments » (Total des segments), « Total Duration » (Durée totale) et « Total Sweeps » (Total des balayages).

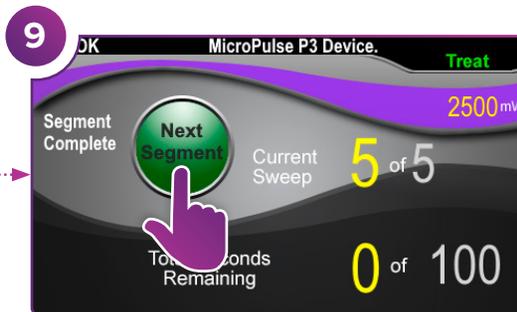

Appuyez pour réinitialiser les valeurs. Pour traiter le segment suivant, répétez l'étape 8. Une fois le traitement terminé, passez à l'étape 10.

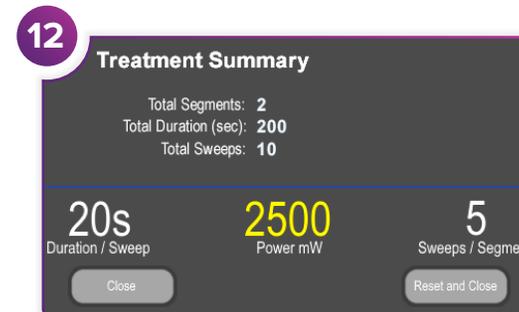


Consultez le résumé du traitement.




Appuyez sur ce bouton pour passer en mode Treat (Traitement) (activation du laser).



Au terme du traitement, appuyez sur ce bouton pour passer en mode Standby (Attente) (désactivation du laser).

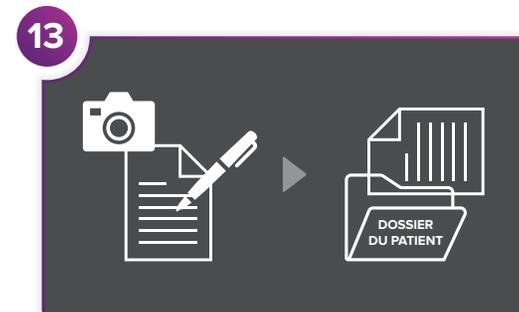

Consignez les informations de traitement.

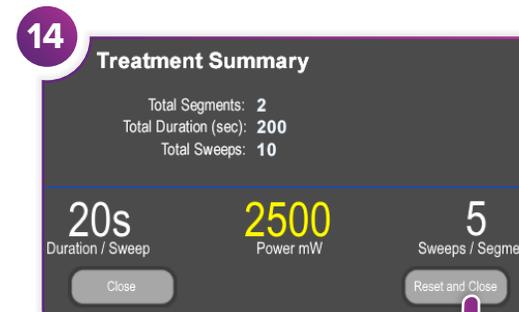

Réinitialisez pour le traitement suivant.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com
© 2022 Iridex. Tous droits réservés. Iridex, le logo Iridex, MicroPulse, MicroPulse P3 et Cyclo G6 sont des marques commerciales déposées d'Iridex. 88305-FR.A 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
Pays-Bas

