


# Schnellstarthandbuch: Cyclo G6®-Laser mit Sweep Management-Software und das MicroPulse P3®-Behandlungsgerät\* verwenden




1 Drehen Sie den Schalter auf **ON** (EIN). Warten Sie, bis die Initialisierung abgeschlossen ist. Verbinden Sie die MicroPulse P3-Sonde.

4 **Behandlungsparameter festlegen**  
Legen Sie die Parameter über das Menü „Preset“ (Voreinstellung) fest oder tragen Sie sie manuell ein.

### Voreinstellung – Option

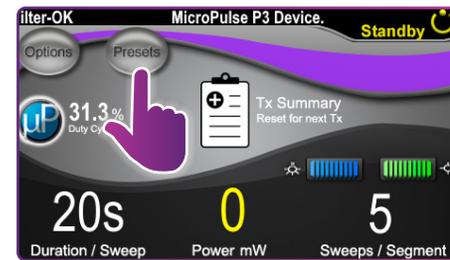

### Manuell – Option

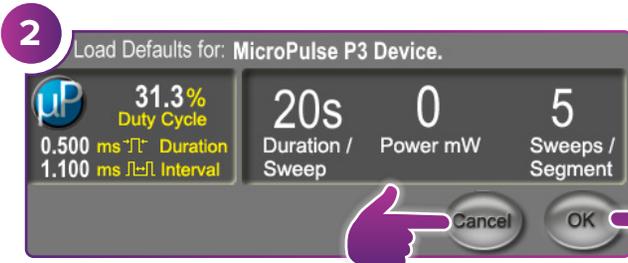

2 Betätigen Sie zum Festlegen neuer Parameter die Schaltfläche **OK** (OK). Daraufhin wird ein Pop-up-Fenster angezeigt (Schritt 3).

3 Betätigen Sie zum Beibehalten der Parameter aus der letzten Behandlung die Schaltfläche **Cancel** (Abbrechen). Daraufhin wird ein Pop-up-Fenster angezeigt (Schritt 3).




3 Betätigen Sie die Schaltfläche **OK** (OK). Gehen Sie zum Festlegen neuer Parameter zu Schritt 4. Um Ihre Parameter beizubehalten, gehen Sie zu Schritt 5.




**WEITERE SCHRITTE FINDEN SIE AUF DER RÜCKSEITE.**



\* Lesen Sie vor der Behandlung zunächst die folgenden Dokumente, um Informationen mit Behandlungsanweisungen zu erhalten, darunter auch Sicherheits-, Warn- und Vorsichtshinweise: „Benutzerhandbuch: Cyclo G6 Software-Upgrade für die transsklerale MicroPulse-Lasertherapie-Behandlung“, „Gebrauchsanweisungen für das Cyclo G6-Lasersystem“ und „Gebrauchsanweisungen für das Cyclo G6-Lasersystem und das MicroPulse P3-Behandlungsgerät“.

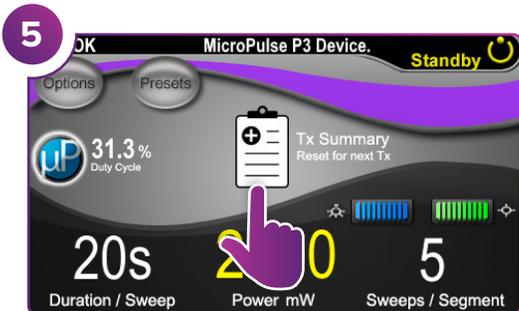


Betätigen Sie die Schaltfläche **Tx Summary** (Tx-Zusammenfassung).

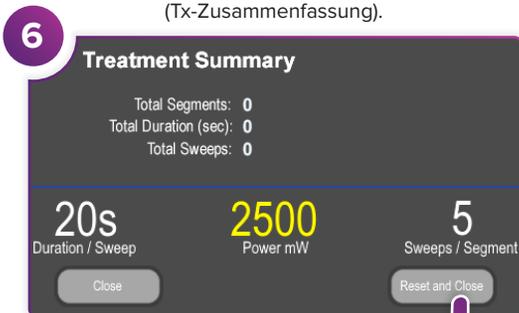


Bestätigen Sie, dass die Werte **Total Segments** (Abschnitte gesamt), **Total Duration** (Gesamtdauer) und **Total Sweeps** (Sweeps gesamt) auf null zurückgesetzt werden sollen.



Betätigen Sie diese Schaltfläche, um den Modus „Treat“ (Behandlung, bei aktiviertem Laser) aufzurufen.

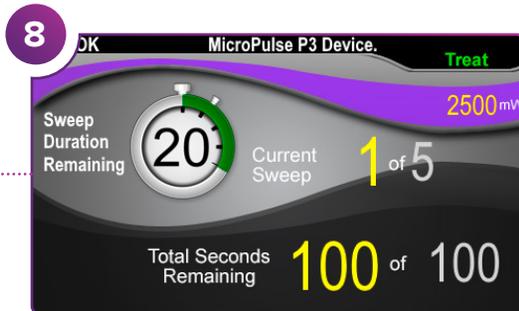


Behandeln Sie den gewünschten Abschnitt.

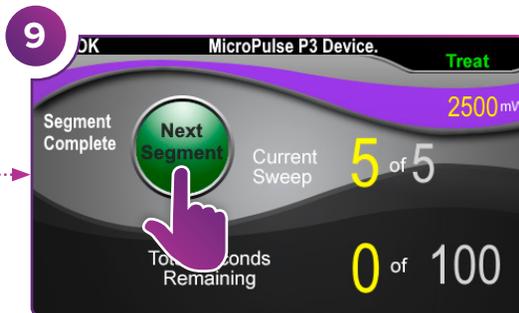


Betätigen Sie diese Schaltfläche, um die Werte zurückzusetzen. Um den nächsten Abschnitt zu behandeln, wiederholen Sie Schritt 8. Fahren Sie nach Abschluss der Behandlung mit Schritt 10 fort.




Betätigen Sie nach Abschluss der Behandlung diese Schaltfläche, um den Modus „Standby“ (Standby, bei deaktiviertem Laser) aufzurufen.

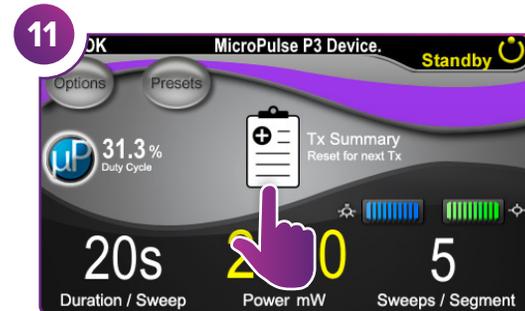

Betätigen Sie diese Schaltfläche, um die Anzeige „Treatment Summary“ (Behandlungszusammenfassung) aufzurufen.

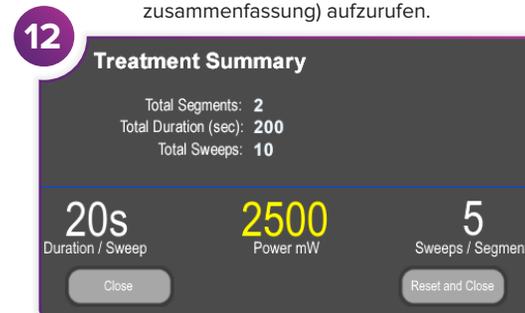

Rufen Sie die Anzeige „Treatment Summary“ (Behandlungszusammenfassung) auf.

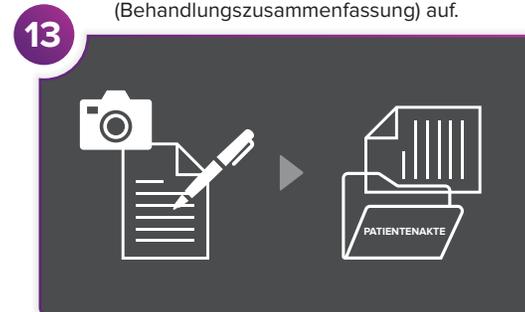

Geben Sie die Behandlungsdaten ein.



Setzen Sie die Werte für die nächste Behandlung zurück.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com  
© 2022 Iridex. Alle Rechte vorbehalten. Iridex, das Iridex-Logo, MicroPulse, MicroPulse P3 und Cyclo G6 sind eingetragene Marken von Iridex. 88305-DE.A 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
Niederlande

