


Rövid útmutató: A Cyclo G6® lézer használata a Sweep Management szoftverrel és a MicroPulse P3® célba juttató eszközzel*




Fordítsa a kulcsot „ON” (Bekapcsolva) állásba. Várja meg az inicializálás befejezését. Csatlakoztassa a MicroPulse P3 szondát.

4 Kezelési paraméterek beállítása
Állítsa be a paramétereket a Preset (Előbeállítás) menü segítségével vagy kézi bevitellel.

Előbeállítás

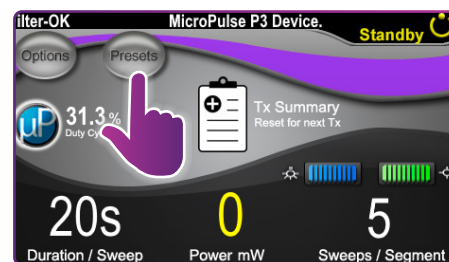

Kézi beállítás

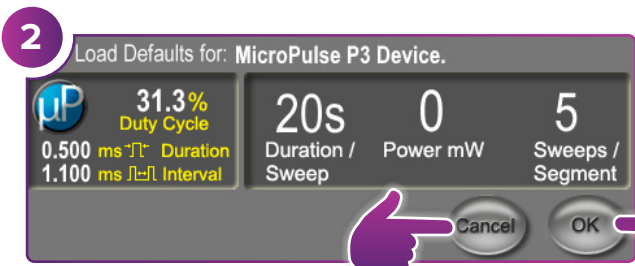


Válassza az „OK” gombot az új paraméterek beállításához. Megjelenik egy felugró képernyő (3. lépés).

Válassza a „CANCEL” (Mégse) gombot az előző kezelés során használt paraméterek megtartásához. Megjelenik egy felugró képernyő (3. lépés).




Nyomja meg az „OK” gombot. Új paraméterek beállításához folytassa a 4. lépéssel. A paraméterek megtartásához folytassa az 5. lépéssel.

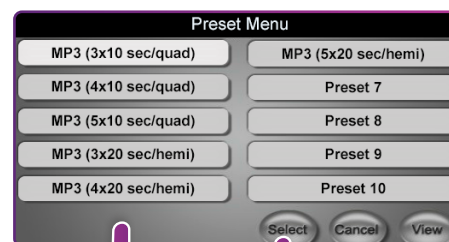

A TOVÁBBI LÉPÉSEKET LÁSD A HÁTSÓ OLDALON



* A kezelés megkezdése előtt olvassa el a „Használati útmutató: Cyclo G6 szoftverfrissítés MicroPulse TLT-hez” útmutatóban, a „Cyclo G6 lézerrendszer kezelői útmutatójában” és a „MicroPulse P3 célba juttató eszköz használati utasításában” a besugárzási utasításokat, beleértve a biztonsági információkat, figyelmeztetéseket és óvintézkedéseket is.

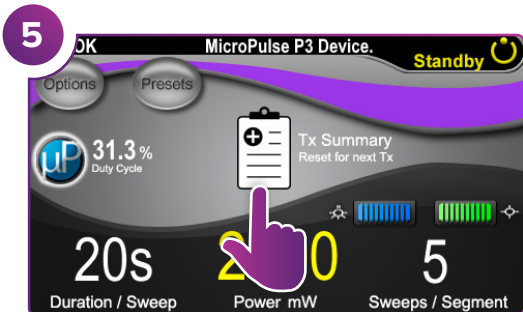


Válassza ki a „Tx Summary” (Kezelés összefoglalása) lehetőséget.




Erősítse meg a „Total Segments” (Összes szegmens), „Total Duration” (Teljes időtartam) és „Total Sweeps” (Összes pásztázás) értékek nullázását.



Nyomja meg ezt a gombot a Treat (Kezelés) üzemmódba való belépéshez (lézer bekapcsolása).

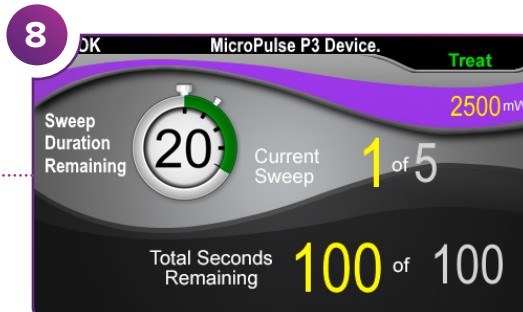


Végezze el a kívánt szegmens kezelését.

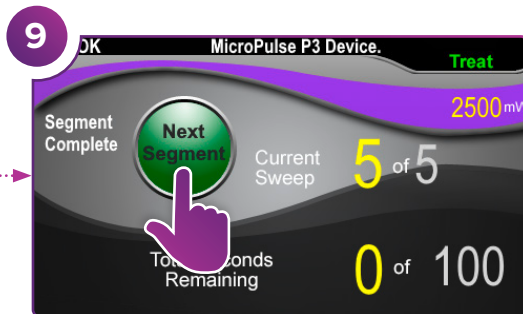


Nyomja meg a kezdőértékek visszaállításához. A következő szegmens kezeléséhez ismétlje meg a 8. lépést. Ha a kezelés befejeződött, folytassa a 10. lépéssel.




A kezelés befejezése után nyomja meg ezt a gombot a Standby (Készenlét) üzemmódba való belépéshez (lézer kikapcsolása).

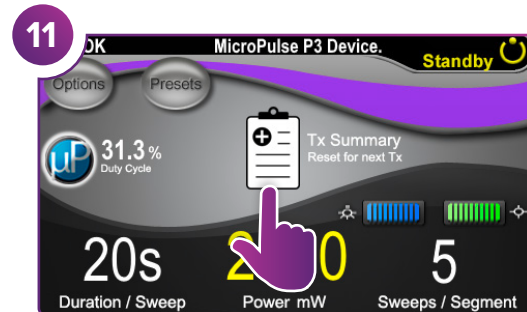


Nyomja meg a kezelés összefoglalásának megtekintéséhez.

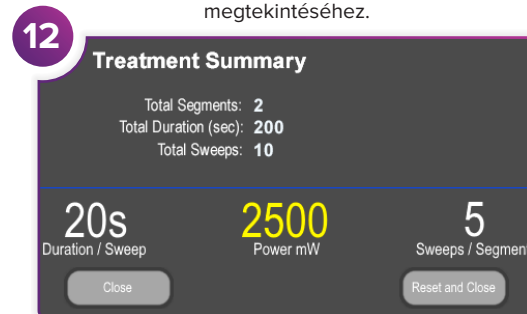

Tekintse át a kezelés összefoglalását.

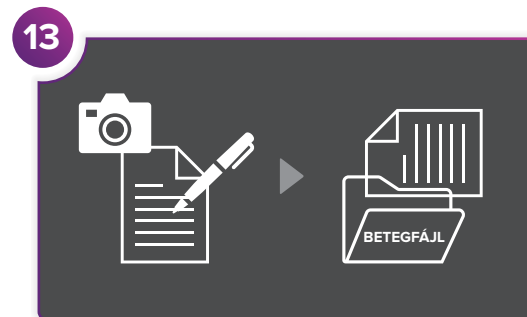

Rögzítse a kezelési információkat.

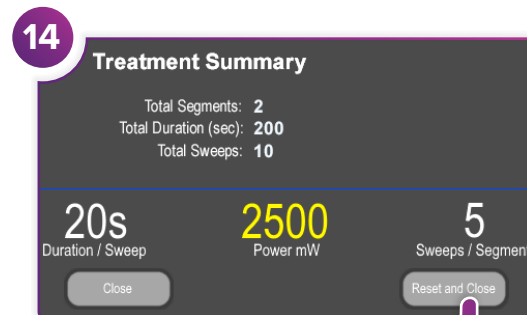

Állítsa vissza a következő kezeléshez.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com
© 2022 Iridex. Minden jog fenntartva. Az Iridex, az Iridex embléma, a MicroPulse, a MicroPulse P3 és a Cyclo G6 az Iridex bejegyzett védjegye. 88305-HU.A 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
Hollandia

