


Snabbguide: Använda Cyclo G6®-lasern med uppgraderingen av svephanteringsprogramvaran och MicroPulse P3®-sändarenheten*




Vrid nyckeln till "ON".
Vänta tills initieringen har slutförts. Anslut MicroPulse P3-sonden.

4 Ställa in behandlingsparametrar
Ställ in parametrar med meny Preset (Förinställning) eller genom att ställa in dem manuellt.

Förinställningsalternativ

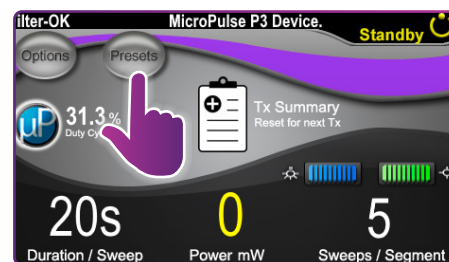

Manuellt alternativ

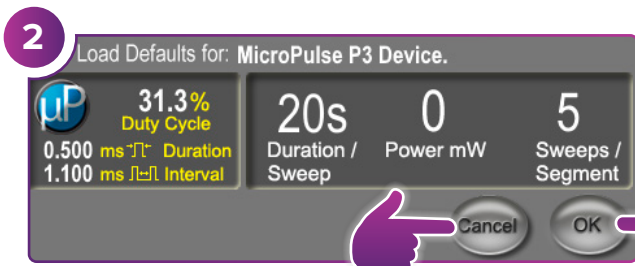


Välj "OK" för att ställa in nya parametrar. Ett popup-fönster visas (Steg 3).

Välj "CANCEL" (AVBRYT) för att behålla parametrarna som användes i en tidigare behandling. Ett popup-fönster visas (Steg 3).




SE FLER STEG
PÅ BAKSIDAN

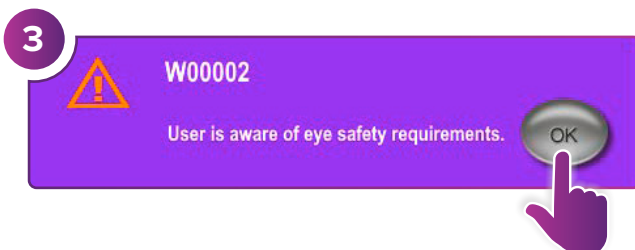


Tryck på "OK".
För att ställa in nya parametrar, gå till Steg 4.
För att behålla dina parametrar, gå till Steg 5.




* Innan behandling avges, se "Användarguide: Cyclo G6-programvaruuppgraderingen för MicroPulse TLT, användarhandboken" till Cyclo G6-lasersystemet och bruksanvisningen till MicroPulse P3-sändarenheten för sändningsanvisningar, inklusive säkerhet, varningar och försiktighetsåtgärder.

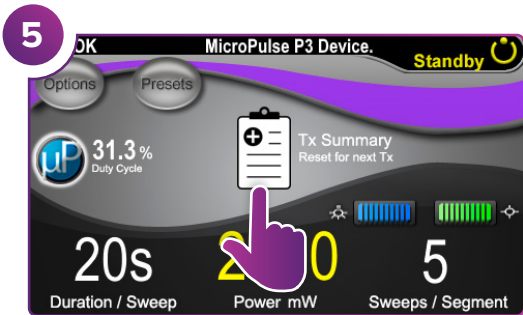


Välj "Tx Summary" (Tx-sammanfattning).

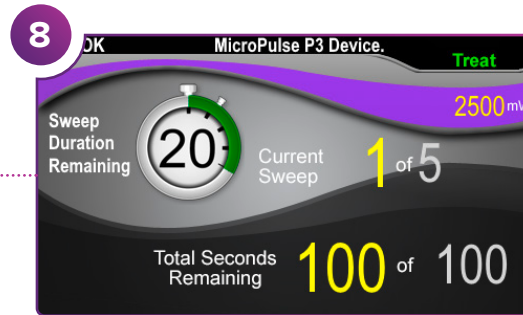


Avge behandling till önskat segment.

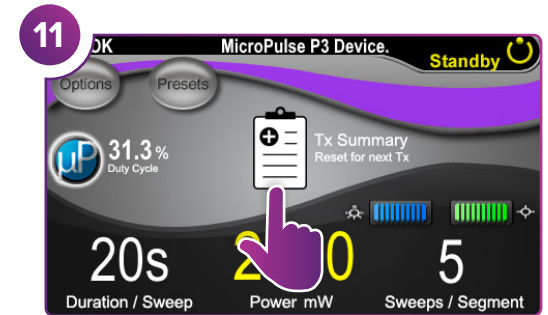


Tryck för att visa behandlingssammanfattning.

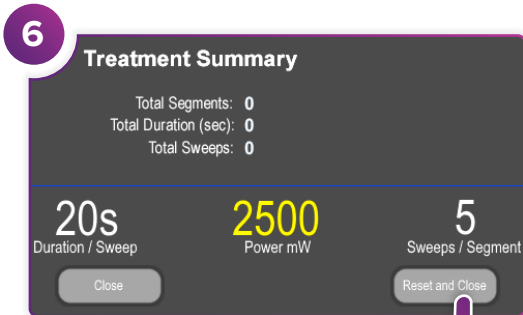

Bekräfta att värdena för "Total Segments" (Totalt antal segment), "Total Duration" (Total varaktighet) och "Total Sweeps" (Totalt antal svep) nollställs.

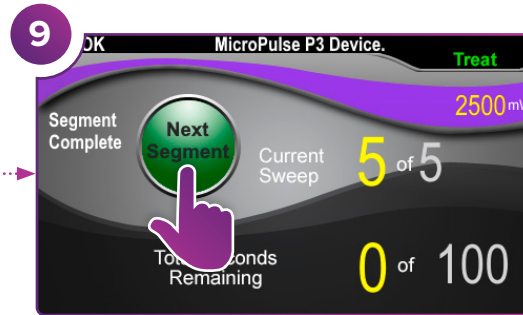

Tryck för att nollställa värdena. För att behandla nästa segment, upprepa Steg 8. När behandlingen har slutförts, fortsätt till Steg 10.

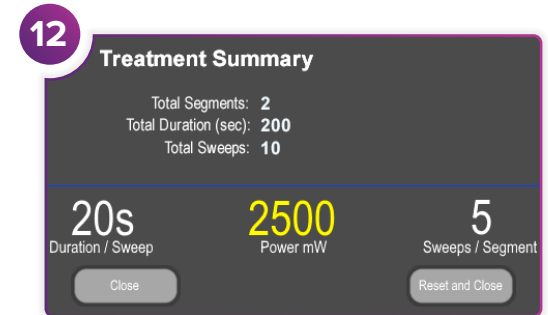


Granska behandlingssammanfattningen.




Tryck på den här knappen för att gå in i Treat (Behandla) (aktivera lasern).



Efter att behandlingen har slutförts, tryck på den här knappen för att gå in i Standby (Viloläge) (inaktivera lasern).

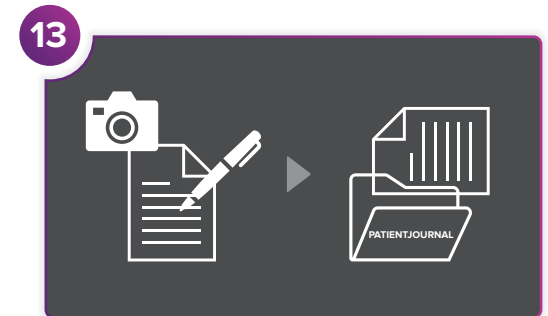

Logga behandlingsinformation.

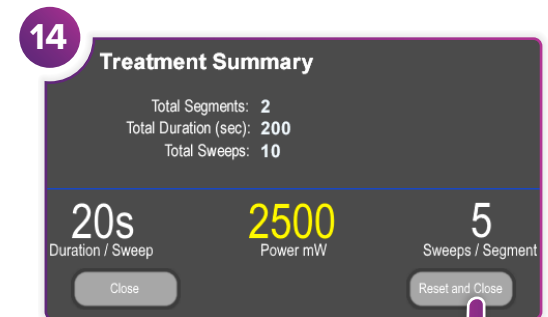

Nollställ för nästa behandling.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com
 © 2022 Iridex. Med ensamrätt. Iridex, Iridex-logotypen, MicroPulse, MicroPulse P3 och Cyclo G6 är registrerade varumärken som tillhör Iridex. 88305-SV.A 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 Nederländerna

