


Hızlı Kılavuz: Tarama Yönetimi Yazılımı ile Cyclo G6® Lazer ve MicroPulse P3® İletim Cihazı* Kullanımı



1 Anahtarı "ON" (AÇIK) konumuna çevirin. Başlatma işleminin tamamlanmasını bekleyin. MicroPulse P3 Probu bağlayın.

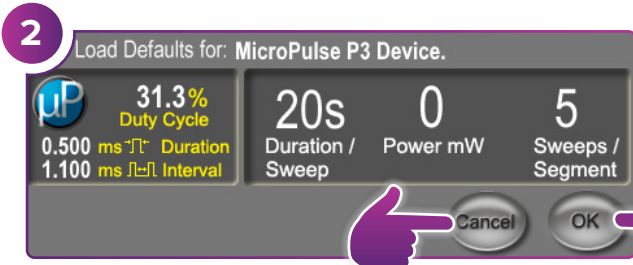


2 Yeni parametreleri ayarlamak için "OK" (Tamam) düğmesini seçin. Bir açılır ekran belirir (3. Adım).

Önceki tedavide kullanılan parametreleri korumak için "CANCEL" (İptal) öğesini seçin. Bir açılır ekran belirir (3. Adım).



3 "OK" (Tamam) öğesine basın. Yeni parametreleri ayarlamak için 4. Adıma gidin. Parametrelerinizi saklamak için 5. Adıma gidin.


4 Tedavi Parametrelerini Ayarlama Preset (Ön Ayar) Menüsunü kullanarak veya manuel giriş yaparak parametreleri ayarlayın.

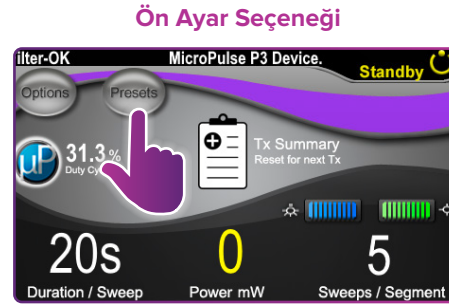


DAHA FAZLA ADIM İÇİN
ARKA SAYFAYA BAKIN



* Tedavi iletimini gerçekleştirmeden önce güvenlik, uyarılar ve dikkat edilecek noktalar da dahil olmak üzere iletim talimatları için bkz. "Kullanım Kılavuzu: MicroPulse TLT için Cyclo G6 Yazılım Yükseltmesi," "Cyclo G6 Lazer Sistemi Kullanıcı El Kitabı" ve "MicroPulse P3 İletim Cihazı Kullanım Talimatları."

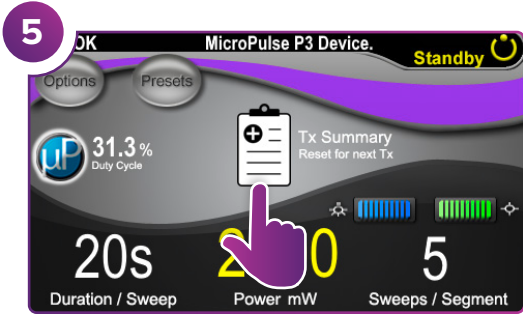


"Tx Summary" (Tx Özeti) ögesini seçin.

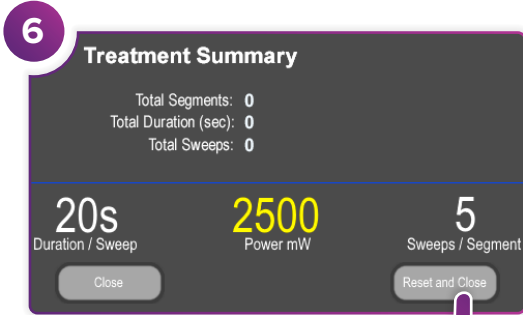


"Total Segments" (Toplam Segment),
"Total Duration" (Toplam Süre) ve
"Total Sweeps" (Toplam Taramalar)
değerlerinin sıfırlandığını onaylayın.



Treat (Tedavi) Moduna
(lazeri etkinleştir) girmek
için bu düğmeye basın.

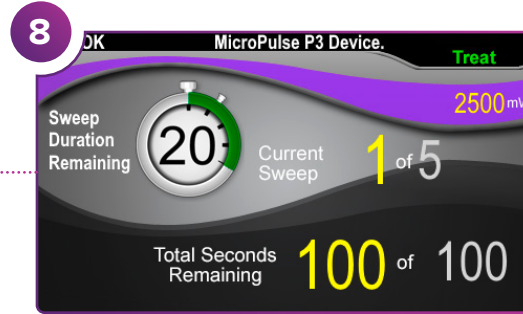


Tedaviyi istenilen segmente iletin.

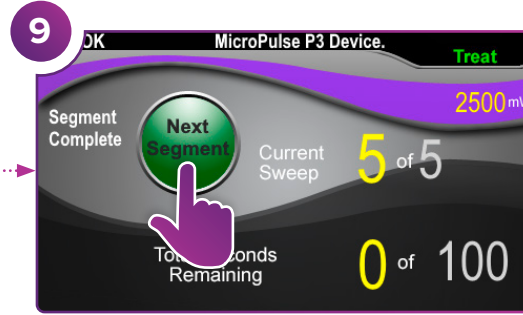


Değerleri sıfırlamak için basın. Sonraki segmenti
tedavi etmek için 8. Adımı tekrarlayın.
Tedavi tamamlandığında 10. Adıma geçin.




Tedavinin tamamlanmasının
ardından Standby (Bekleme)
Moduna (lazeri devre dışı bırak)
girmek için bu düğmeye basın.

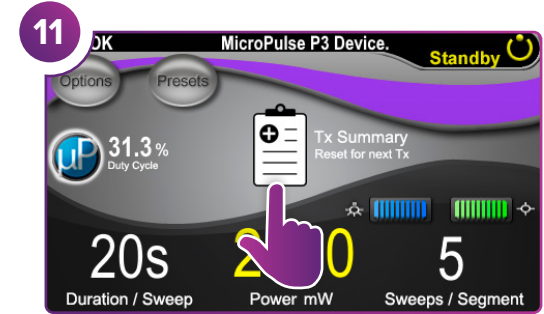


Tedavi özeti görüntülemek için basın.

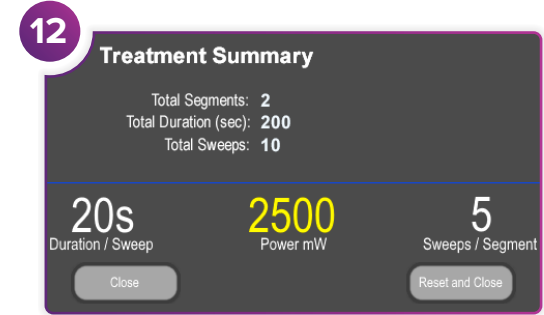

Tedavi özeti inceleyin.

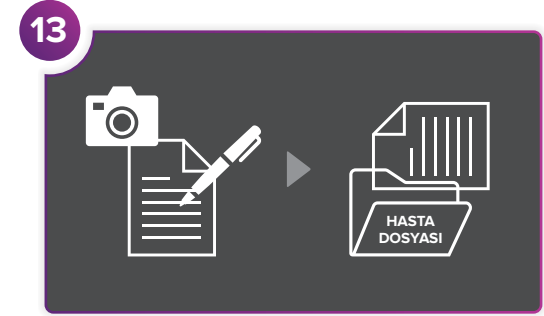

Tedavi bilgilerinizi kaydedin.

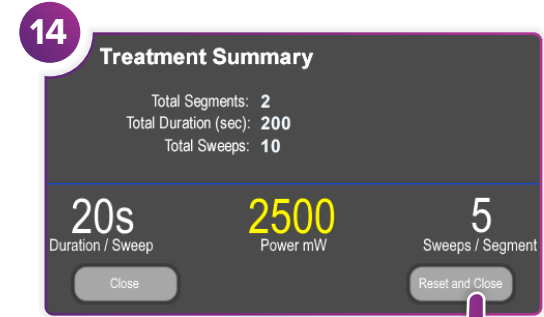

Sonraki tedavi için sıfırlayın.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com
© 2022 Iridex. Tüm hakları saklıdır. Iridex, Iridex logosu, MicroPulse,
MicroPulse P3 ve Cyclo G6, Iridex'in tescilli ticari markalarıdır. 88305-
TRA.02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
Hollanda

