


Guia rápido: Utilização do laser Cyclo G6® com o software de gerenciamento de varredura e o dispositivo de administração* MicroPulse P3®




1 Gire a chave para "ON" (Ligado). Aguarde a conclusão da inicialização. Conecte a sonda MicroPulse P3.

4 **Configuração dos parâmetros de tratamento**
Defina os parâmetros usando o menu de pré-configurações ou inserindo-os manualmente.

Opção de pré-configuração

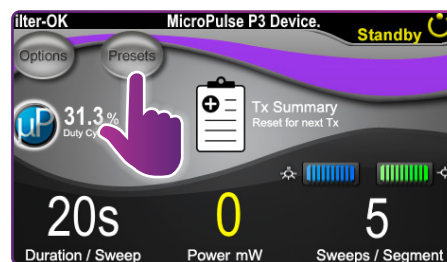


Opção manual

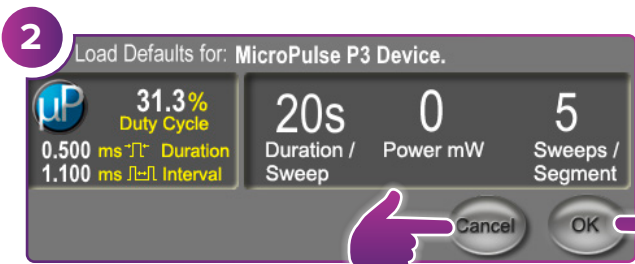


2 Selecione "OK" para configurar os novos parâmetros. Uma janela pop-up será exibida (Etapa 3).

Selecione "CANCEL" (Cancelar) para reter os parâmetros usados no tratamento anterior. Uma janela pop-up será exibida (Etapa 3).

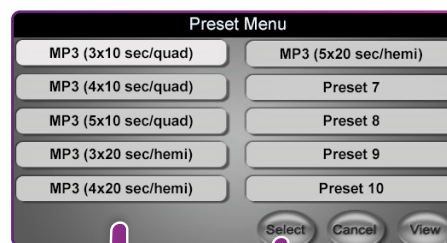


VEJA MAIS ETAPAS NO VERSO DA PÁGINA

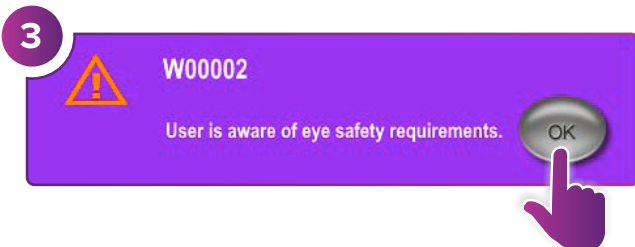


3 Pressione "OK". Para definir novos parâmetros, vá para a Etapa 4. Para reter os parâmetros, vá para a Etapa 5.



* Antes de administrar o tratamento, consulte o "Guia do usuário: upgrade do software Cyclo G6 para TLT MicroPulse", o "Manual do operador do sistema de laser Cyclo G6" e as "Instruções de uso do dispositivo de administração MicroPulse P3" para obter instruções de administração, incluindo segurança, avisos e precauções.

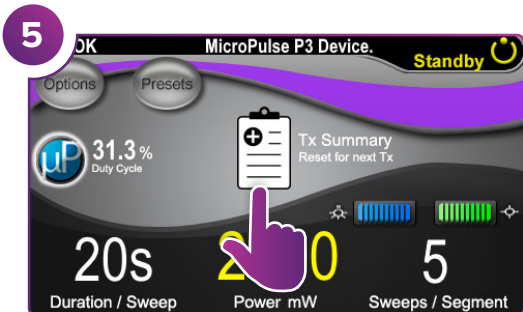


Selecione "Tx Summary" (Resumo do Tx).

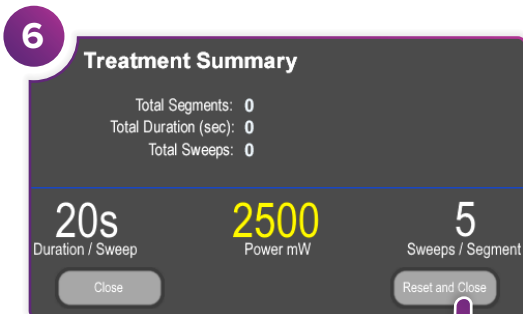


Confirme que os valores de "Total Segments" (Segmentos totais), "Total Duration" (Duração total) e "Total Sweeps" (Varreduras totais) estão zerados.



Pressione este botão para entrar no modo de tratamento (ativar o laser).

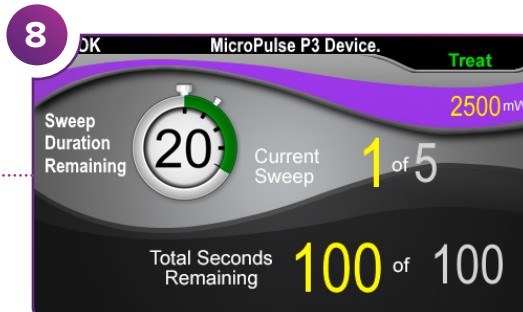


Administre o tratamento no segmento desejado.

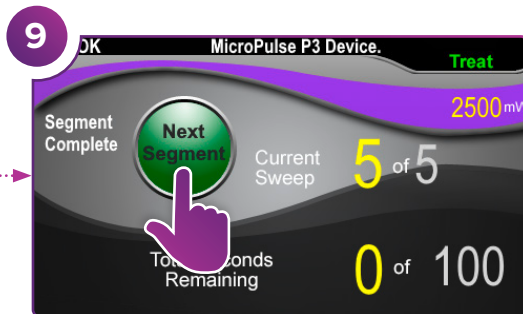


Pressione para redefinir os valores. Para tratar o próximo segmento, repita a Etapa 8. Quando o tratamento estiver concluído, prossiga para a Etapa 10.




Ao concluir o tratamento, pressione este botão para entrar no modo de espera (desativar o laser).

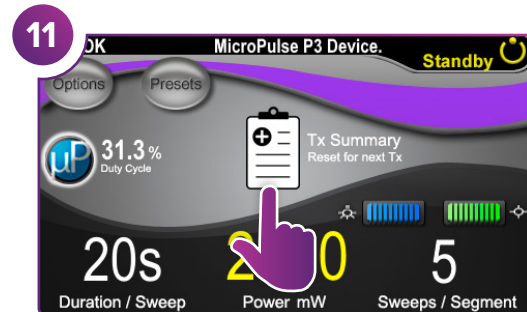


Pressione para exibir o resumo do tratamento.

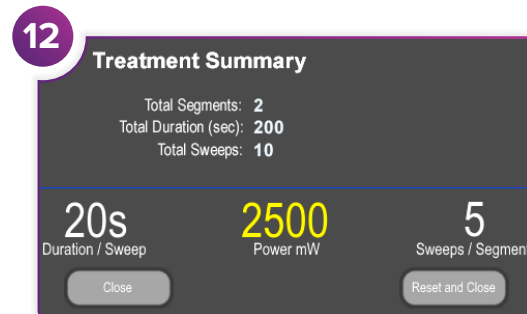

Revise o resumo do tratamento.

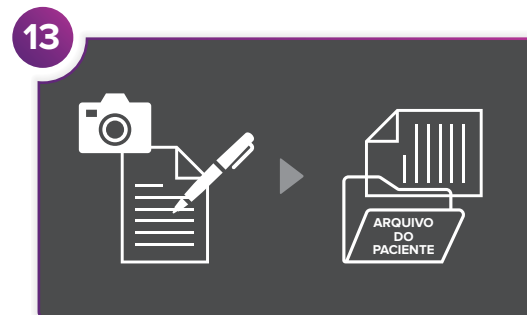

Registre as informações do tratamento.

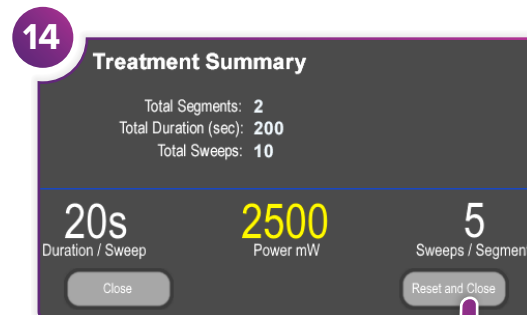

Redefina os valores para o próximo tratamento.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com
 © 2022 Iridex. Todos os direitos reservados. Iridex, o logotipo Iridex, MicroPulse, MicroPulse P3 e Cyclo G6 são marcas registradas da Iridex. 88305-PO-BR.A 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP Haia
 Países Baixos

