


Brzi vodič: upotreba lasera Cyclo G6® sa softverom Sweep Management i uređajem za primjenu MicroPulse P3®*




Okrenite ključ u položaj „ON” (Uključeno). Pričekajte dovršetak inicijalizacije. Povežite sondu MicroPulse P3.

4 Postavljanje parametara tretmana
Postavite parametre pomoću izbornika Preset (Prethodno postavljene vrijednosti) ili tako da ih unesete ručno.

Opcija izbornika
Prethodno postavljene vrijednosti

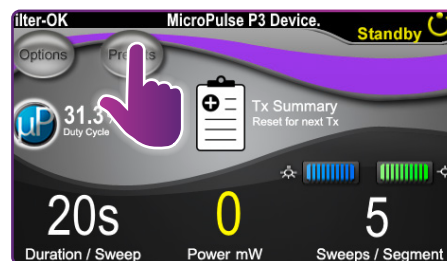


Opcija ručnog unosa

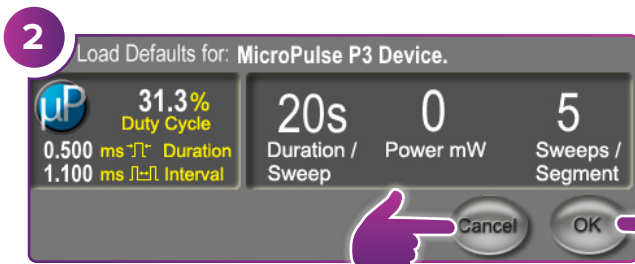

Odaberite „OK” (U redu) za postavljanje novih parametara. Prikazat će se skočni zaslon (3. korak).

Odaberite „CANCEL” (PONIŠTI) za zadržavanje parametara korištenih u prethodnom tretmanu. Prikazat će se skočni zaslon (3. korak).

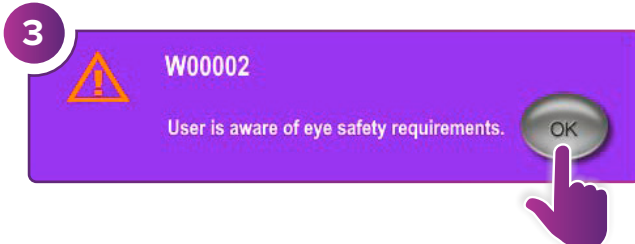


3 Pritisnite „OK” (U redu). Za postavljanje novih parametara prijedite na 4. korak. Za zadržavanje parametara prijedite na 5. korak.




VIŠE KORAKA NA STRAŽNJOJ STRANICI




* Prije primjene tretmana pogledajte „Korisnički vodič: nadogradnja softvera Cyclo G6 za tretman TLT načinom MicroPulse”, „Korisnički priručnik za laserski sustav Cyclo G6” i „Upute za upotrebu uređaja za primjenu MicroPulse P3” za upute za primjenu, uključujući sigurnost, upozorenja i mjere opreza.

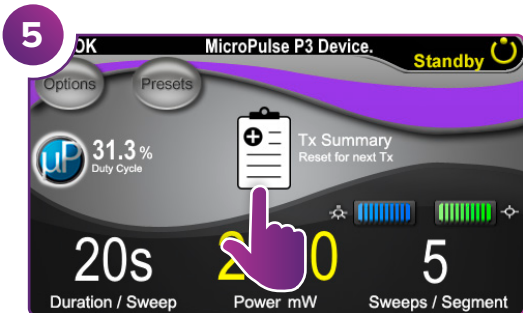


5 Odaberite „Tx Summary” (Sažetak tretmana).

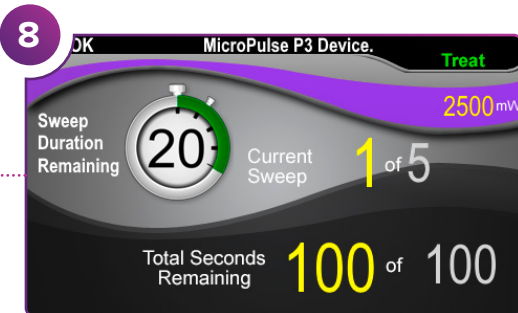


8 Primijenite tretman na željeni segment.

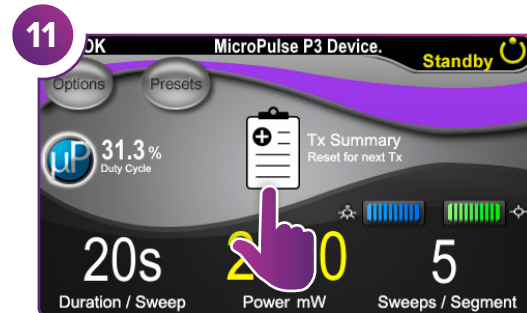


11 Pritisnite za prikaz sažetka tretmana.

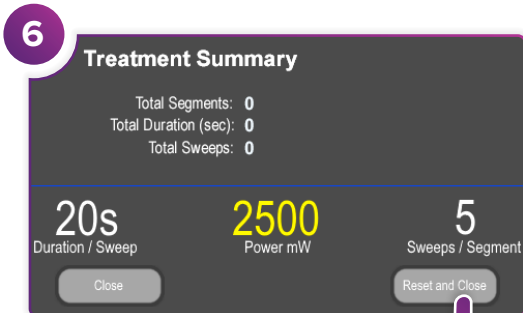

6 Potvrdite vraćanje vrijednosti za „Total Segments” (Ukupan broj segmenata), „Total Duration” (Ukupno trajanje) i „Total Sweeps” (Ukupan broj pomaka) na nulu.

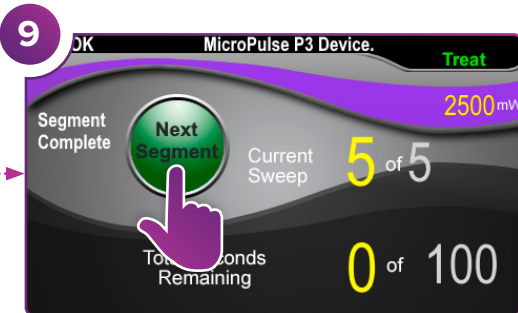

9 Pritisnite za poništavanje vrijednosti. Za tretiranje sljedećeg segmenta ponovite 8. korak. Kada dovršite tretman, prijedite na 10. korak.

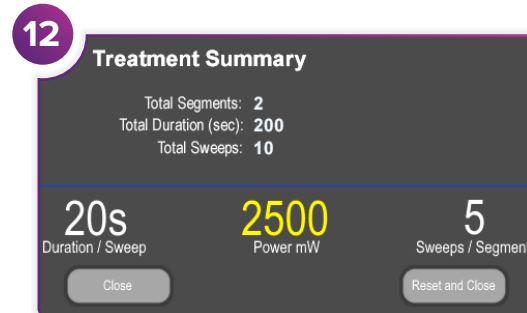


12 Pregledajte sažetak tretmana.




7 Pritisnite taj gumb za ulazak u način rada Treat (Tretman) (omogućavanje lasera).



10 Po završetku tretmana pritisnite taj gumb za ulazak u način rada Standby (Mirovanje) (onemogućavanje lasera).

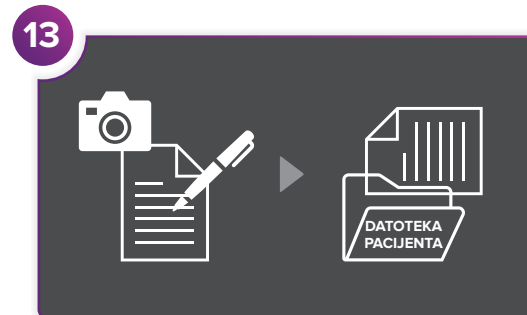

13 Unesite podatke o tretmanu.

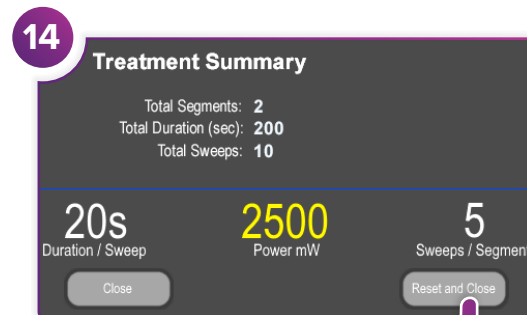

14 Poništite vrijednosti za sljedeći tretman.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com
 © 2022 Iridex. Sva prava pridržana. Iridex, logotip tvrtke Iridex, MicroPulse, MicroPulse P3 i Cyclo G6 registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Iridex. 88305-HR.A 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 Nizozemska

