


Skrócona instrukcja: korzystanie z urządzenia Laser Cyclo G6® z oprogramowaniem do zarządzania przesuwem oraz urządzenia dostarczającego wiązkę MicroPulse P3®*




Przekręcić kluczyk do położenia **ON** (WŁ.). Zaczekać na zakończenie inicjalizacji. Podłączyć głowicę MicroPulse P3.

4 Ustawianie parametrów zabiegu
Ustawić parametry za pomocą menu Preset (Ustawienia wstępne) lub ręcznie.

Opcja wykorzystania ekranu
Ustawienia wstępne

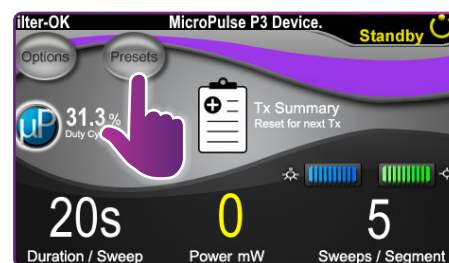


Opcja ręcznego wprowadzenia parametrów

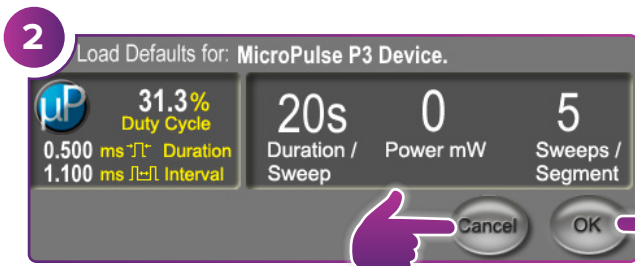


Nacisnąć przycisk **OK**, aby zaakceptować nowe parametry. Pojawi się wyskakujące okno (krok 3).

Nacisnąć przycisk **CANCEL** (ANULUJ), aby zachować parametry z poprzedniego zabiegu. Pojawi się wyskakujące okno (krok 3).

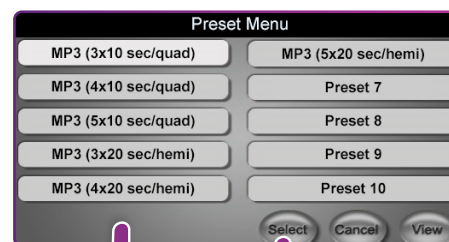


**DALSZE KROKI
NA ODWROTCIE**

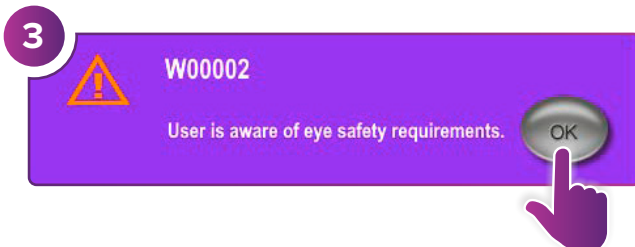


Nacisnąć przycisk **OK**. Aby ustawić nowe parametry, przejść do kroku 4. Aby zachować parametry, przejść do kroku 5.



* Przed przeprowadzeniem zabiegu należy zapoznać się z instrukcją obsługi: aktualizacji oprogramowania Cyclo G6 dla TLT MicroPulse, instrukcją obsługi systemu laserowego Cyclo G6 oraz instrukcją obsługi urządzenia dostarczającego wiązkę MicroPulse P3 w celu uzyskania instrukcji dotyczących dostarczania wiązki, w tym w zakresie bezpieczeństwa, ostrzeżeń i przestróg.

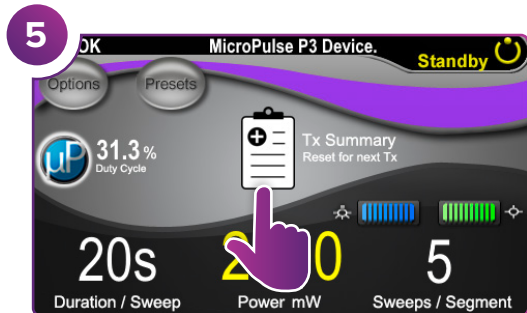


Wybrać opcję **Tx Summary** (Podsumowanie leczenia).

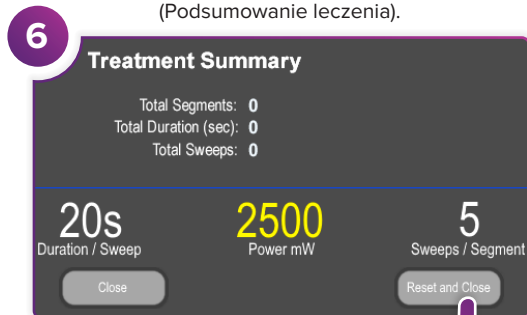


Potwierdzić wyzerowanie wartości **Total Segments** (Łączna liczba odcinków), **Total Duration** (Łączny czas trwania) oraz **Total Sweeps** (Łączna liczba przesuwów).



Nacisnąć ten przycisk, aby przejść do trybu Treat (Leczenie) (włączyć laser).

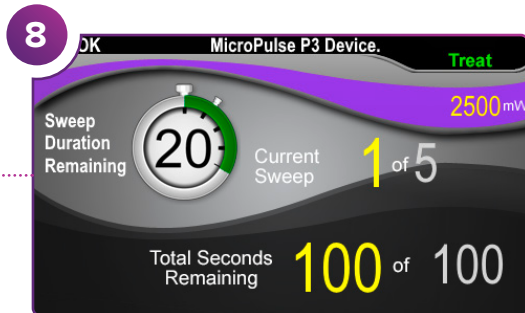


Przeprowadzić leczenie pożądanego odcinka.

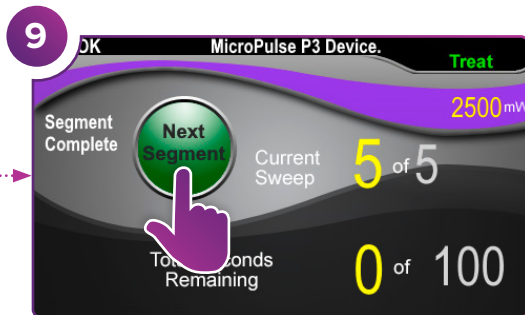


Nacisnąć przycisk, aby zresetować wartości. Aby przeprowadzić leczenie następnego odcinka, powtórzyć krok 8. Po zakończeniu leczenia przejść do kroku 10.




Po zakończeniu zabiegu nacisnąć ten przycisk, aby przejść do trybu Standby (Gotowość) (wyłączyć laser).

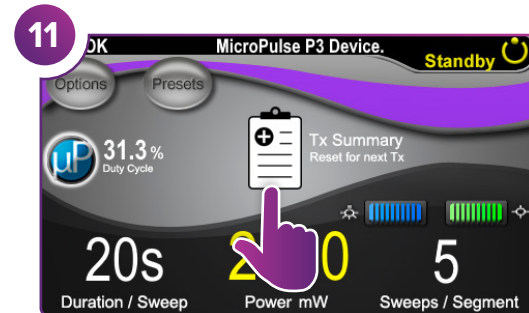


Nacisnąć, aby wyświetlić podsumowanie leczenia.

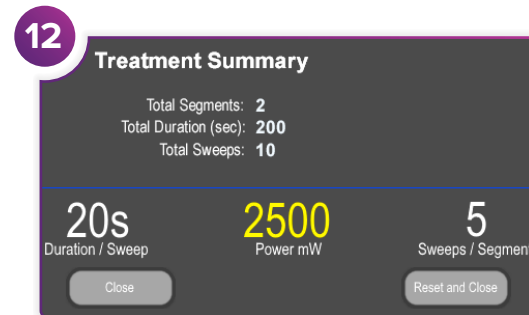

Przejrzeć podsumowanie leczenia.

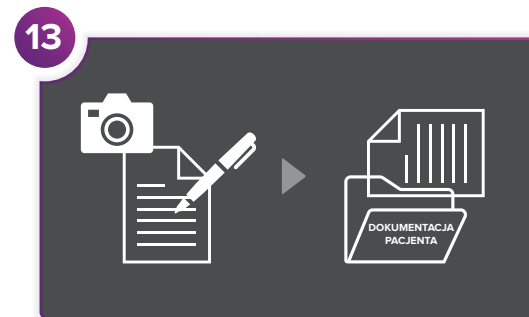

Zapisać informacje o leczeniu.

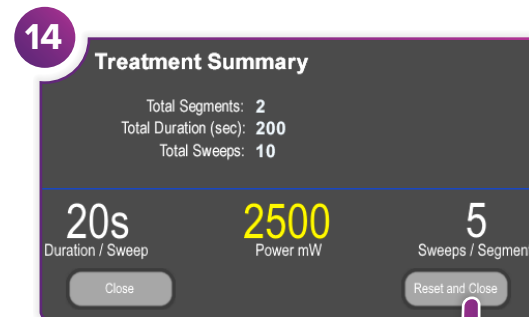

Zresetować wartości przed kolejnym zabiegiem.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com
 © 2022 Iridex. Wszelkie prawa zastrzeżone. Iridex, logo Iridex, MicroPulse, MicroPulse P3 oraz Cyclo G6 to znaki towarowe firmy Iridex. 88305-PL.A 02,2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 Holandia

