


# Ghid rapid: Utilizarea Laserului Cyclo G6® Laser cu Software de gestionare a glisărilor și a Dispozitivului de administrare\* MicroPulse P3®




Puneți comutatorul cu cheie în poziția „ON” („PORNIT”). Așteptați să se finalizeze inițierea. Conectați Sonda MicroPulse P3.

**4** **Setarea parametrilor de tratament**  
Setați parametrii utilizând Preset Menu (Meniul Valori presetate) sau introducându-i manual.

Opțiune Valori presetate

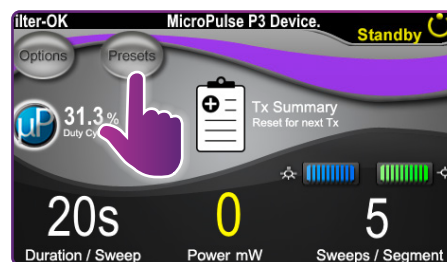


Opțiune manuală

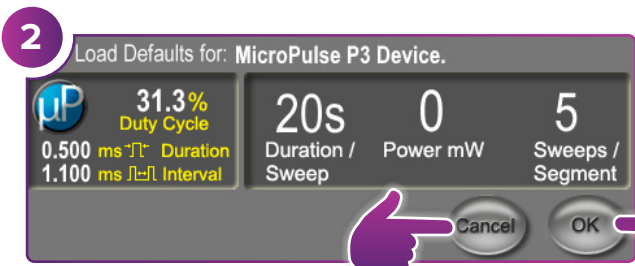


Selecționați „OK” pentru a seta noii parametri. Va apărea o fereastră pop-up (Pasul 3).

Selecționați „CANCEL” („ANULARE”) pentru a păstra parametrii folosiți în tratamentul anterior. Va apărea o fereastră pop-up (Pasul 3).

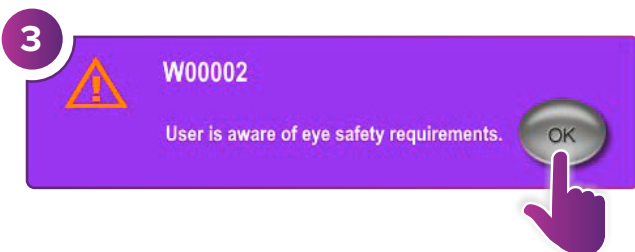


Apăsați pe „OK”. Pentru a seta parametrii noi, mergeți la Pasul 4. Pentru a păstra parametrii existenți, mergeți la Pasul 5.

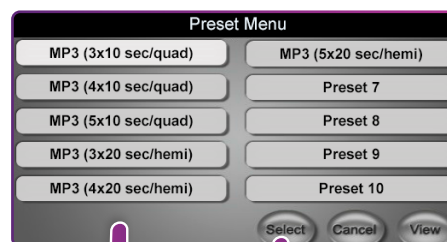


VEDEȚI MAI MULȚI PAȘI PE PAGINA DIN SPATE




\* Înainte de administrarea tratamentului, consultați „Ghid de utilizare: Versiunea software îmbunătățită Cyclo G6 pentru MicroPulse TLT”, „Manualul de utilizare a Sistemului laser Cyclo G6” și „Instrucțiunile de utilizare a dispozitivului de administrare MicroPulse P3” pentru instrucțiuni privind administrarea, inclusiv pe cele privind siguranța, avertismentele și precauțiile.

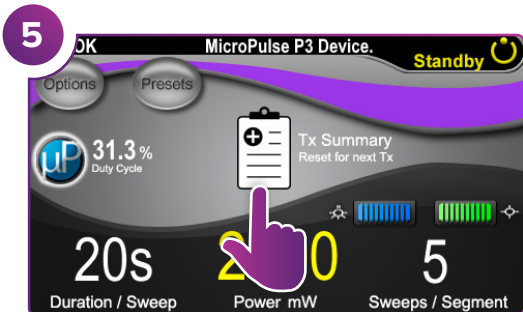


5 Selectați „Tx Summary” („Sumar Tx”).

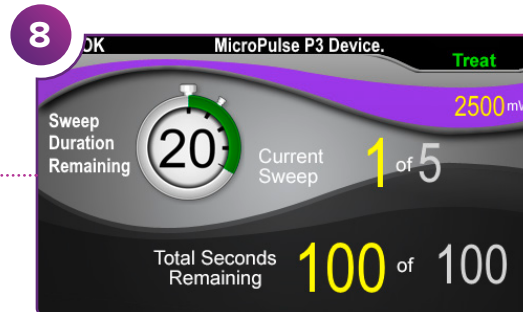


8 Administrați tratamentul pe segmentul dorit.

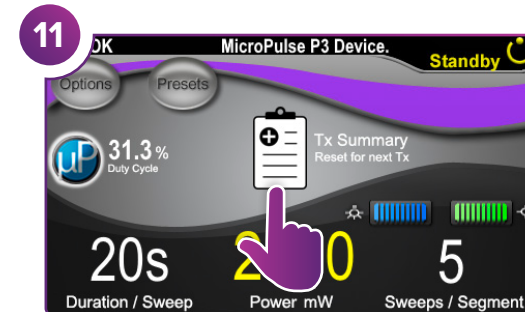


11 Apăsați pentru a vizualiza rezumatul tratamentului.

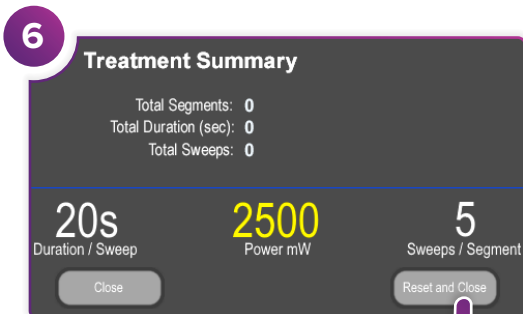

6 Confirmați că valorile „Total Segments” („Total segmente”), „Total Duration” („Durata totală”) și „Total Sweeps” („Total glisări”) sunt resetate la zero.

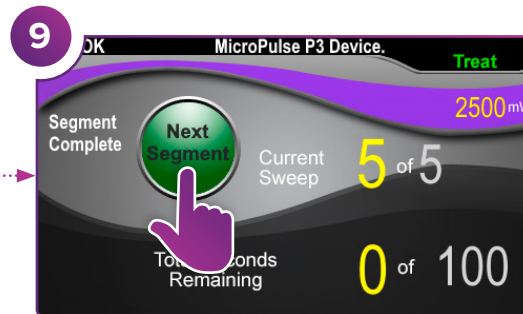

9 Apăsați pentru a reseta valorile. Pentru a trata segmentul următor, repetați Pasul 8. La încheierea tratamentului, continuați la Pasul 10.

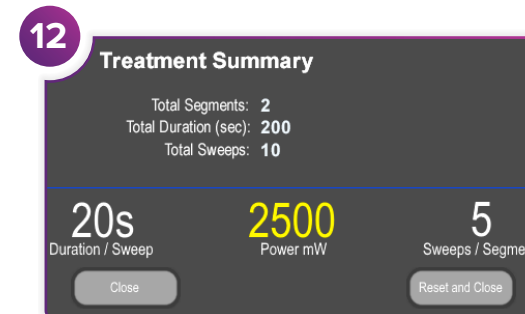


12 Revizuiți rezumatul tratamentului.




7 Apăsați acest buton pentru a intra în Modul Treat (Modul Tratament, activare laser).



10 La încheierea tratamentului, apăsați acest buton pentru a intra în Modul Standby (dezactivare laser).

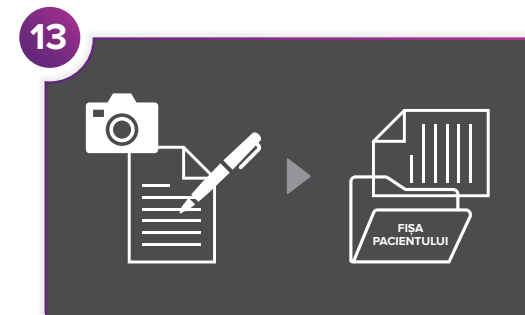

13 Înregistrați informațiile despre tratament.

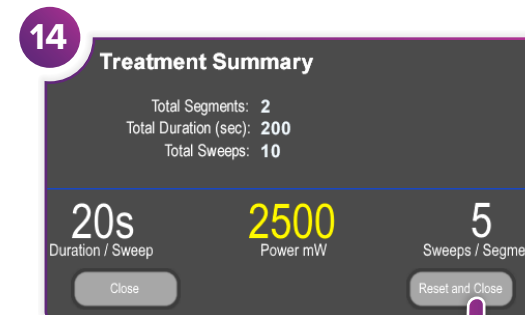

14 Resetați pentru tratamentul următor.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com  
© 2022 Iridex. Toate drepturile rezervate. Iridex, sigla Iridex, MicroPulse, MicroPulse P3 și Cyclo G6 sunt mărci comerciale înregistrate ale Iridex. 88305-RO.A 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europa  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
Olanda

