


Hitri vodnik: Uporaba laserja Cyclo G6® s programsko opremo za upravljanje pomikanja in pripomočkom za dovajanje MicroPulse P3®*




Zasukajte ključ v položaj »ON« (Vklop).
Počakajte, da se inicializacija dokonča. Priklopite sondo MicroPulse P3.

4 Nastavitev parametrov za zdravljenje
Nastavite parametre prek menija »Preset« (Prednastavitev) ali z ročnim vnosom.

Možnost Prednastavitev

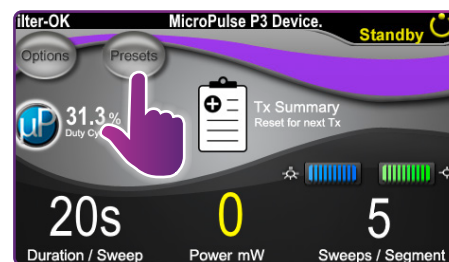


Možnost ročnega vnosa

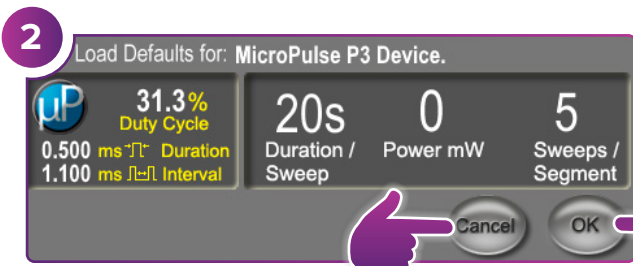

Izberite »OK« (V redu), da nastavite nove parametre. Prikaže se pojavni zaslon (3. korak).

Izberite »CANCEL« (Prekliči), da ohranite parametre, uporabljene pri predhodnem zdravljenju. Prikaže se pojavni zaslon (3. korak).

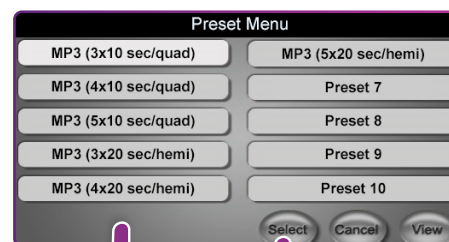

OGLEJTE SI VEČ KORAKOV NA HRBTNI STRANI




Pritisnite »OK« (V redu). Za nastavitev novih parametrov pojdite na 4. korak.


Za ohranitev parametrov pojdite na 5. korak.



* Pred izvajanjem zdravljenja glejte »Uporabniški vodnik: Nadgradnja programske opreme Cyclo G6 za terapijo TLT v načinu MicroPulse«, »Priročnik za upravljalca laserskega sistema Cyclo G6« ter »Navodila za uporabo pripomočka za dovajanje MicroPulse P3« za navodila glede dovajanja, vključno z varnostnimi informacijami, opozorili in svarili.

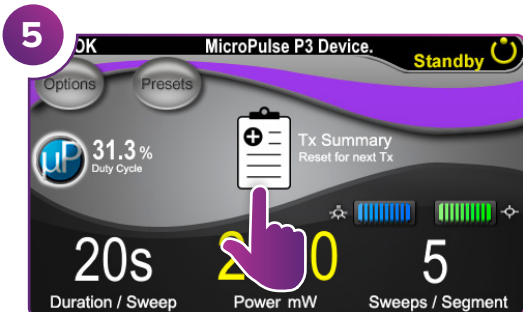


Izberite »Tx Summary« (Povzetek zdravljenja).

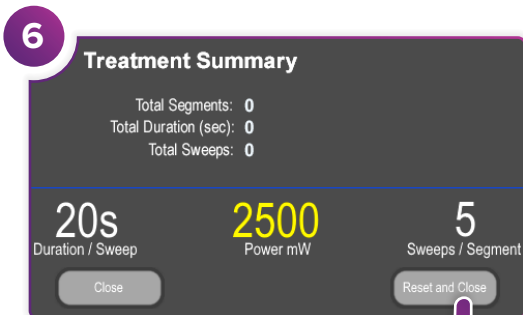


Potrdite, da so vrednosti »Total Segments« (Skupno število segmentov), »Total Duration« (Skupno trajanje) in »Total Sweeps« (Skupno število pomikov) ponastavljene na nič.



Pritisnite ta gumb za preklp v način »Treat« (Zdravljenje) (omogočenje laserja).

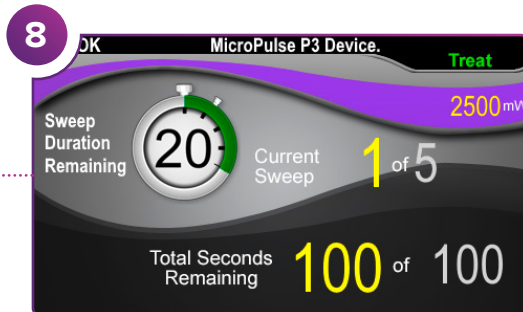


Izvedite zdravljenje želenega segmenta.

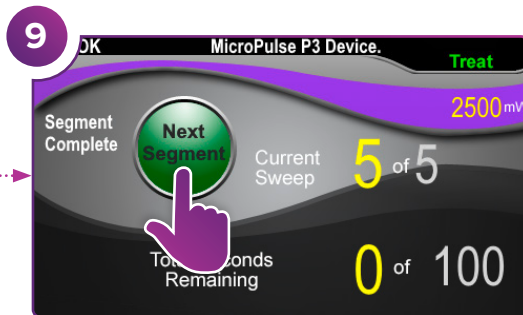


Pritisnite za ponastavitev vrednosti. Za zdravljenje naslednjega segmenta ponovite 8. korak. Ko je zdravljenje dokončano, nadaljujte na 10. korak.




Ko je zdravljenje dokončano, pritisnite ta gumb za preklp v način »Standby« (Mirovanje) (onemogočenje laserja).

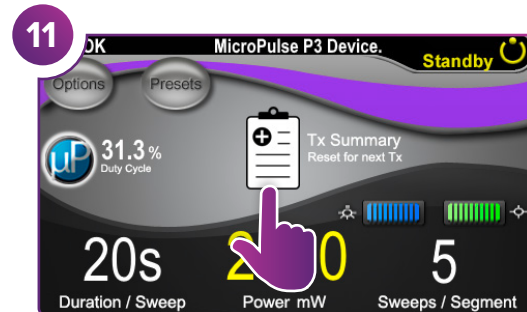


Pritisnite za ogled povzetka zdravljenja.

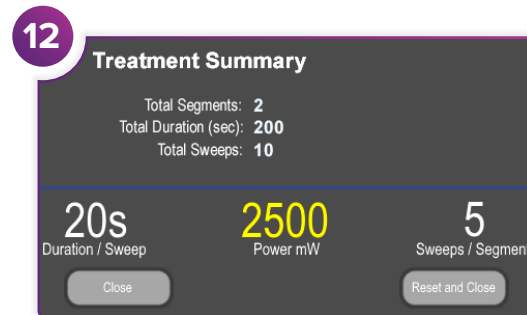

Preglejte povzetek zdravljenja.

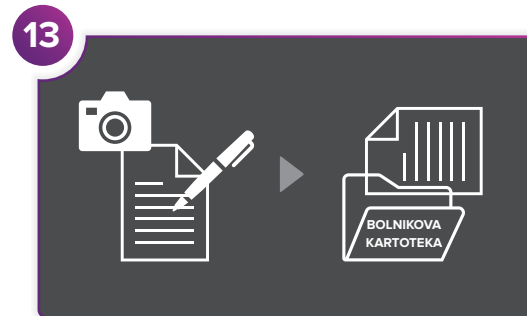

Zabeležite podatke o zdravljenju.

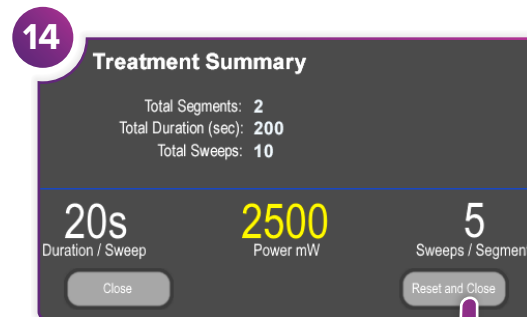

Ponastavite za naslednje zdravljenje.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com
© 2022 Iridex. Vse pravice pridržane. Iridex, logotip Iridex, MicroPulse, MicroPulse P3 in Cyclo G6 so registrirane blagovne znamke družbe Iridex. 88305-SLA 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
Nizozemska

