


Pikaopas: Cyclo G6® -laserin käyttö yhdessä Sweep Management -ohjelmiston ja MicroPulse P3® -syöttölaitteen kanssa*




1 Käännä avain "ON" (päällä) -asentoon. Odota, kunnes on alustus on valmis. Yhdistä MicroPulse P3 -sondi.


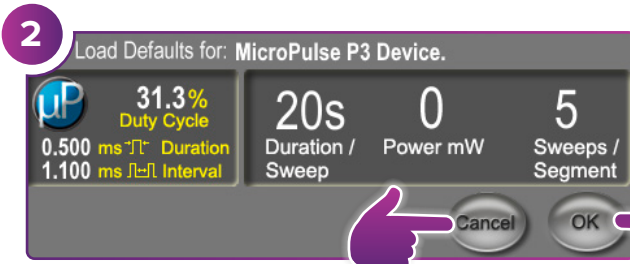


2 Aseta uudet parametrit valitsemalla "OK". Näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna (Vaihe 3).

Käytä edellisen hoidon parametrejä valitsemalla "CANCEL" (Peruuta). Näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna (Vaihe 3).

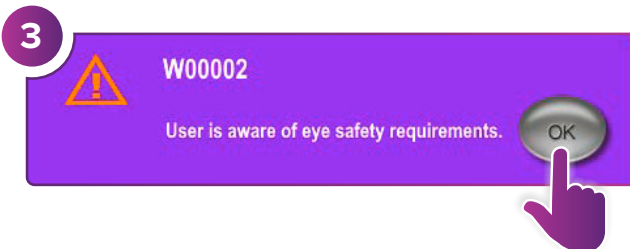


3 Paina "OK". Jos haluat asettaa uudet parametrit, siirry vaiheeseen 4. Jos haluat säilyttää parametrit, siirry vaiheeseen 5.

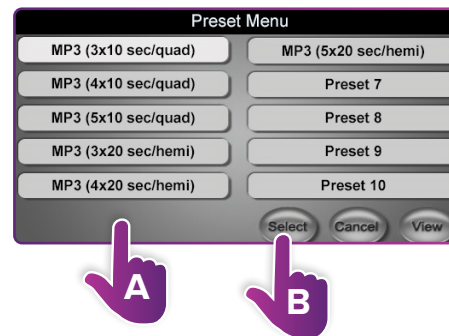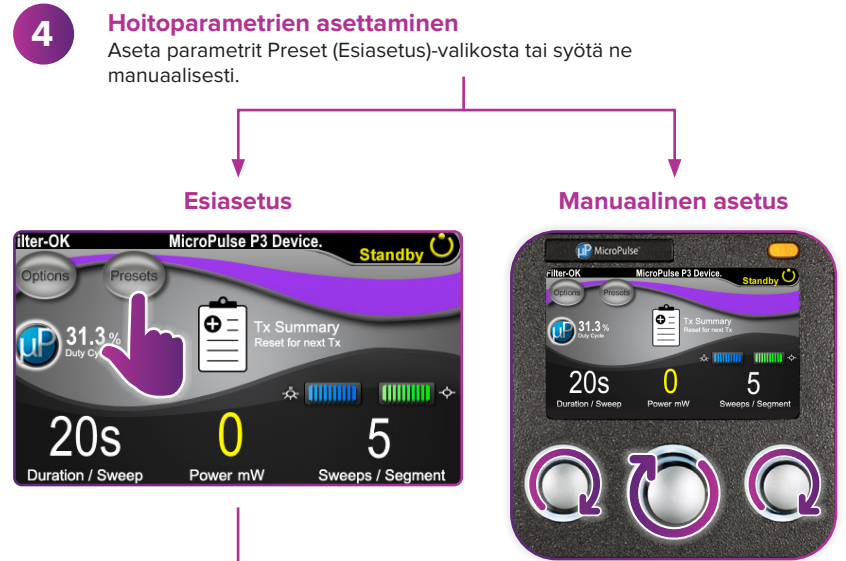


LISÄÄ VAIHEITA TAKASIVULLA ►




* Ennen kuin aloitat hoidon, tutustu ohjeisiin "Käyttöopas: Cyclo G6 -ohjelmiston päivitys MicroPulse TLT -toimenpidettä varten", "Cyclo G6 -laserjärjestelmän käyttäjän opas" ja "MicroPulse P3 -syöttölaitteen käyttöohjeet", joista saat lisätietoa hoidon antamisesta sekä turvallisuudesta, varoituksista ja huomioista.

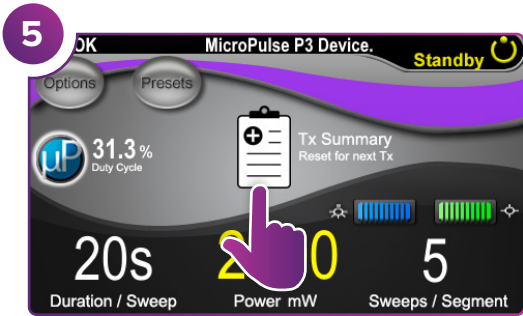


Valitse "Tx Summary" (Tapahtumayhteenveto).

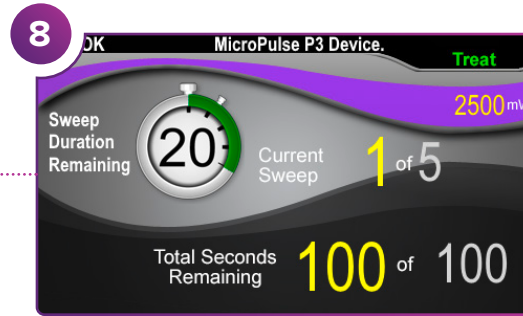


Hoida haluamasi segmentti.

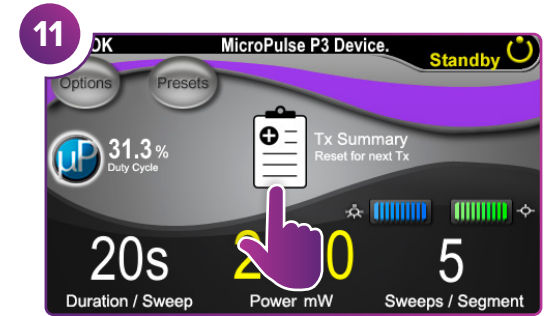


Avaa hoidon yhteenveto painamalla tätä.

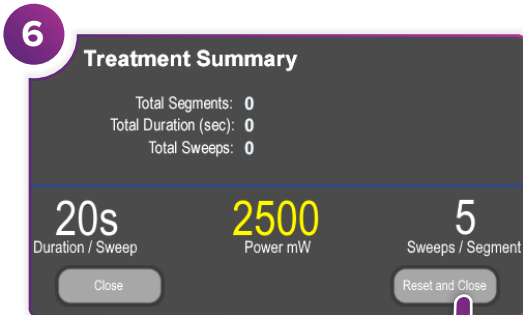

Tarkista, että "Total Segments" (Segmenttien kokonaismäärä)-, "Total Duration" (Kokonaiskesto)- ja "Total Sweeps" (Pyyhkäisyjen kokonaismäärä) -arvot ovat nolautuneet.

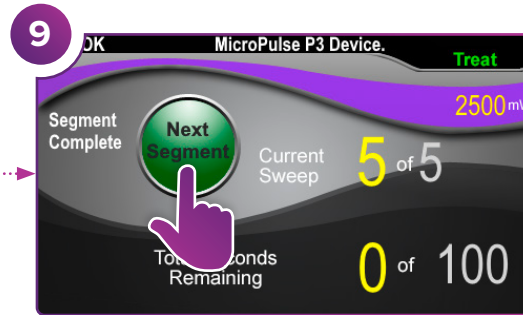

Nollaa arvot painamalla. Hoida seuraava segmentti toistamalla vaihe 8. Kun hoito on valmis, jatka vaiheeseen 10.

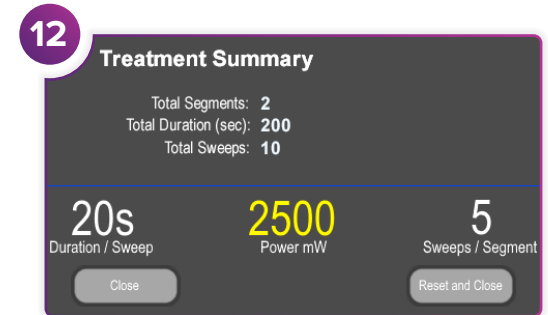


Käy läpi hoidon yhteenveto.




Siirry hoitotilaan (Treat) (käynnistä laser)



Kun hoito on valmis, siirry valmiustilaan (Standby) (sammuta laser) painamalla tätä painiketta.

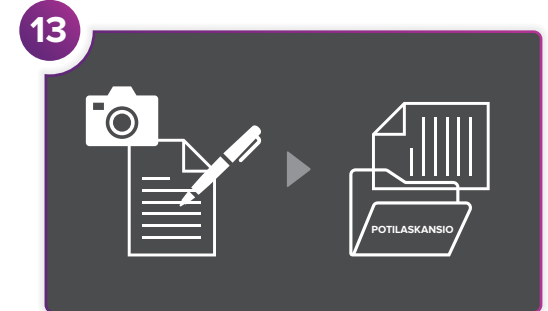

Kirjaa hoidon tiedot.

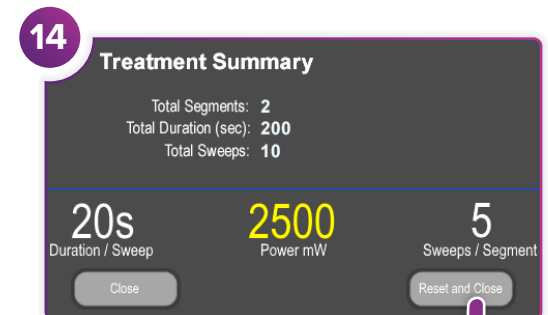

Nollaa seuraavaa hoitoa varten.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com
© 2022 Iridex. Kaikki oikeudet pidätetään. Iridex, Iridex-logo, MicroPulse, MicroPulse P3 ja Cyclo G6 ovat Iridexin rekisteröityjä tavaramerkkejä. 88305-FI.A 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
Alankomaat

