

Lühijuhend: seadme Cyclo G6® Laser kasutamine koos pühkimishaldustarkvara ja MicroPulse P3® edastusseadmega*





1 Keerake võti asendisse „ON” (Sees). Oodake, kuni lähtestamine on lõppenud. Ühendage MicroPulse P3-andur.

4 Raviparameetrite seadistamine
Seadistage parameetrid Preset (Eelseadistatud) menüü või käsitsi sisestamise abil.


Eelseadistatud suvand

Käsitsi suvand

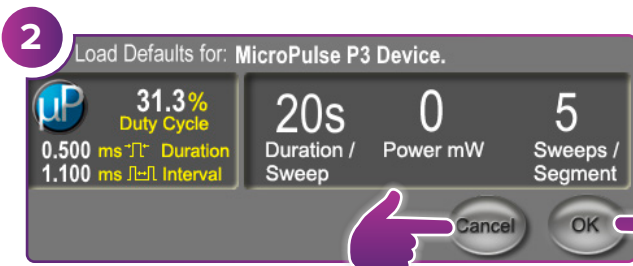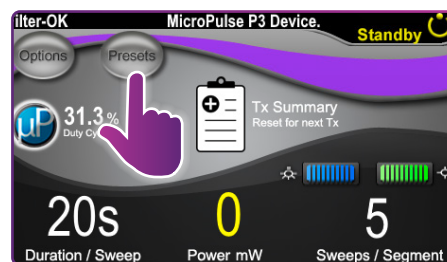


2 Valige uute parameetrite seadistamiseks nupp „OK”. Kuvatakse hüppikaken (3. toiming).

Valige suvand „CANCEL” (Tühista), et hoida alles varasema ravi käigus kasutatud parameetrid. Kuvatakse hüppikaken (3. toiming).

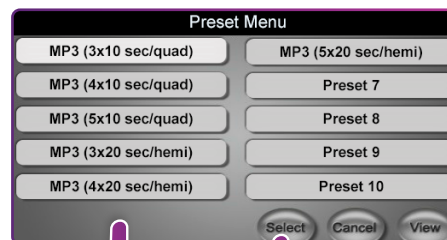


VT ROHKEM TOIMINGUID TAGUMISELT LEHEKÜLJEL

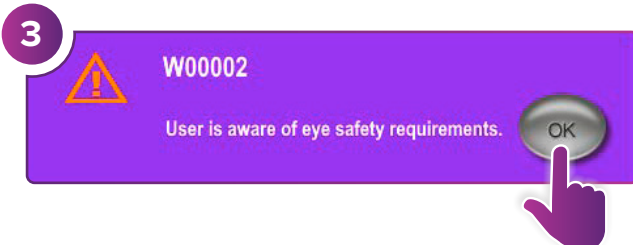


3 Vajutage nuppu „OK”. Minge uute parameetrite seadistamiseks 4. toimingusse. Minge parameetrite alles jätmiseks 5. toimingusse.




* Enne ravi alustamist lugege dokumenti „Kasutusjuhend: Cyclo G6 tarkvarauuendus MicroPulse TLT jaoks”, dokumenti „Laserisüsteemi Cyclo G6 kasutusjuhend” ja dokumenti „Edastusseadme MicroPulse P3 kasutusjuhend” juhiste, sh ohutusteadete, hoiatuste ja ettevaatusabinõude nägemiseks.

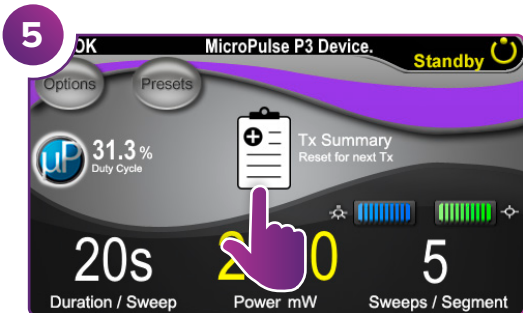


Valige suvand „Tx Summary” (Tx-i kokkuvõte).

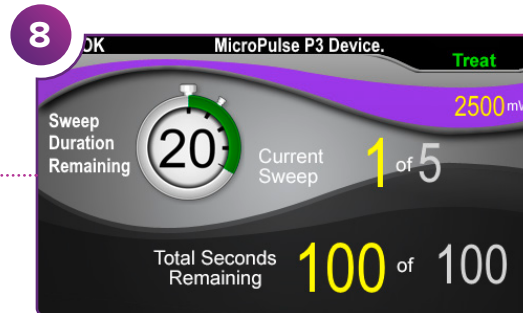


Osutage ravi soovitud segmentis.

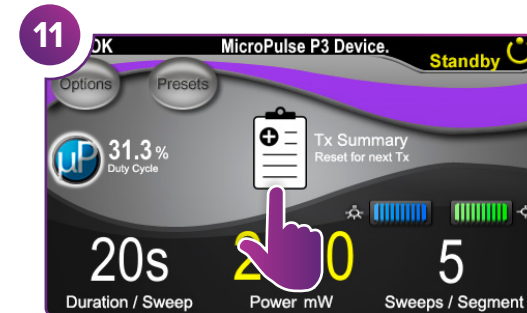


Vajutage ravi kokkuvõtte vaatamiseks.

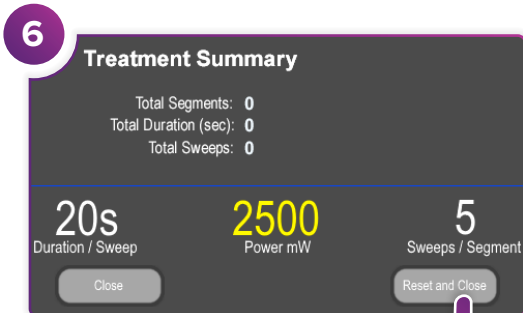

Kinnitage, et suvandite „Total Segments” (Segmentide koguarv), „Total Duration” (Kogukestus) ja „Total Sweeps” (Pühkimiste koguarv) väärtused oleks nulli lähtestatud.

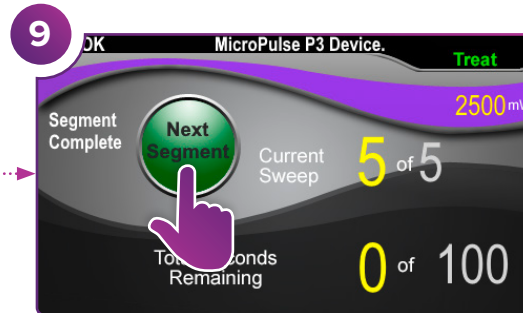

Vajutage seda väärtuste lähtestamiseks. Järgmise segmenti ravimiseks korralke 8. toimingut. Kui ravi on lõpetatud, jätkake 10. toiminguga.

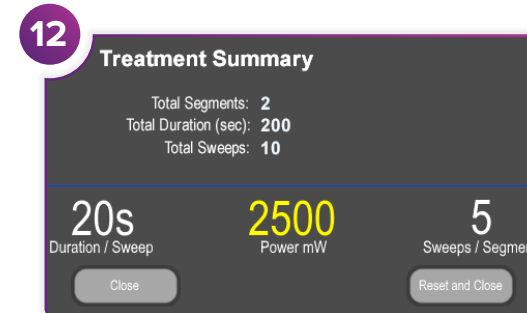

Vaadake ravi kokkuvõtet.




Vajutage seda nuppu Treat (Ravirežiim) sisenemiseks (laseri aktiveerimiseks).



Vajutage seda nuppu pärast ravi lõpetamist Standby (Ooterežiim) sisenemiseks (laseri inaktiveerimiseks).



Logige raviteavet.

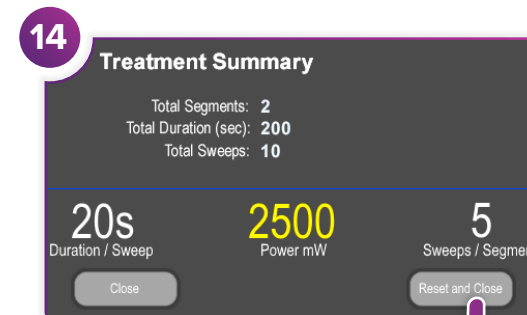

Lähtestage järgmise ravi jaoks.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com
© 2022 Iridex. Kõik õigused on kaitstud. Iridex, Iridexi logo, MicroPulse, MicroPulse P3 ja Cyclo G6 on ettevõtte Iridex registreeritud kaubamärgid. 88305-ETA 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
Holland

