

Guía rápida: uso del láser Cyclo G6® con el Software de Gestión de Barrido y el dispositivo de emisión MicroPulse P3®*




1 Gire la llave a la posición de encendido (“ON”). Espere a que se complete la inicialización. Conecte la sonda MicroPulse P3.

4 **Configuración de los parámetros de tratamiento**
Configure los parámetros utilizando el menú Presets (Valores predefinidos) o introduciéndolos manualmente.



MÁS PASOS EN EL REVERSO DE LA PÁGINA

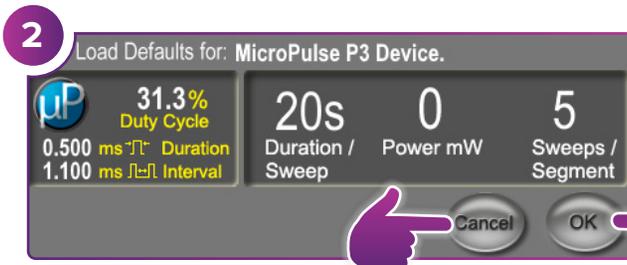

2 Seleccione “OK” (Aceptar) para configurar nuevos parámetros. Aparecerá una pantalla emergente (paso 3).


Seleccione “CANCEL” (Cancelar) para conservar los parámetros utilizados en el tratamiento anterior. Aparecerá una pantalla emergente (paso 3).




3 Pulse “OK” (Aceptar). Para configurar nuevos parámetros, vaya al paso 4. Para conservar los parámetros, vaya al paso 5.




* Antes de administrar el tratamiento, consulte la guía del usuario: Actualización del software Cyclo G6 para MicroPulse TLT, el manual del usuario del sistema del láser Cyclo G6 y las instrucciones de uso del dispositivo de emisión MicroPulse P3 para conocer las instrucciones de administración, incluidas la seguridad, las advertencias y las precauciones.

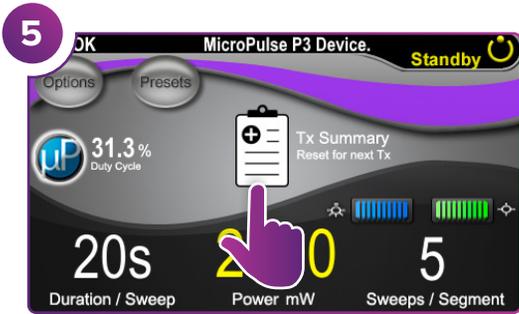


Seleccione "Tx Summary" (Resumen de Tx).

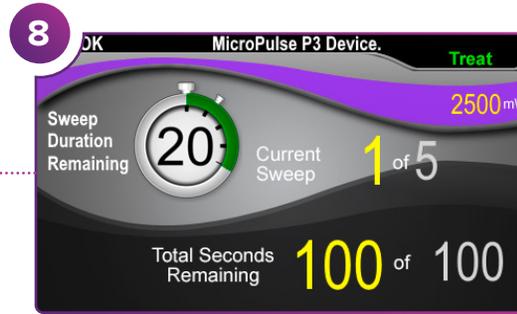


Administre el tratamiento al segmento deseado.

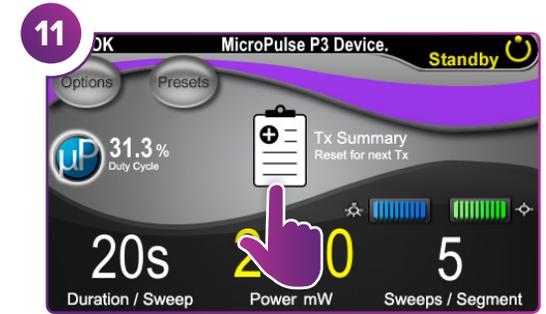


Pulse para ver el resumen del tratamiento.

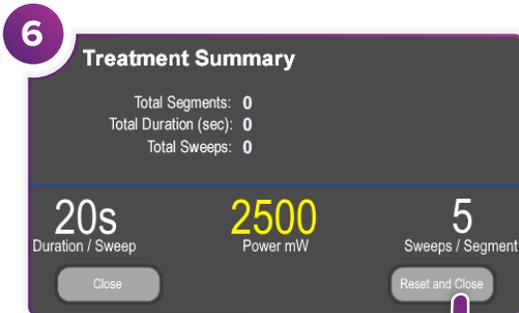

Confirme que los valores de "Total Segments" (Total de segmentos), "Total Duration" (Duración total) y "Total Sweeps" (Total de barridos) se han restablecido a cero.

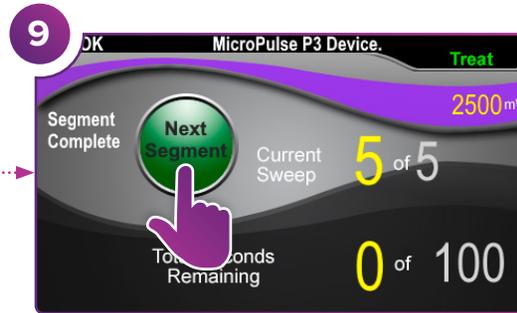

Pulse esta opción para restablecer los valores. Para tratar el siguiente segmento, repita el paso 8. Cuando termine el tratamiento, continúe con el paso 10.

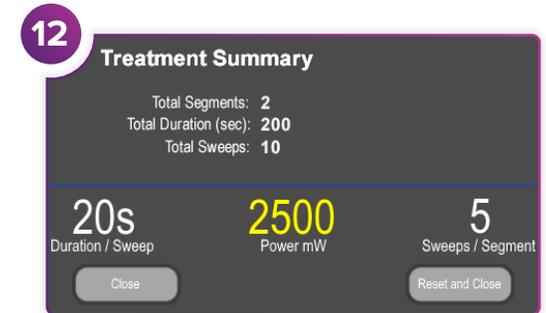


Revise el resumen del tratamiento.




Pulse este botón para entrar en modo Treat (Tratamiento) (habilitar el láser).



Al finalizar el tratamiento, pulse este botón para entrar en modo Standby (En espera) (deshabilitar el láser).

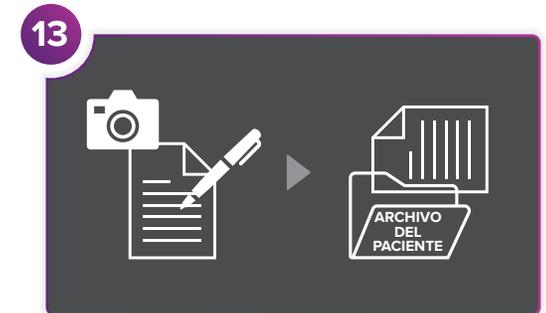

Registre la información del tratamiento.

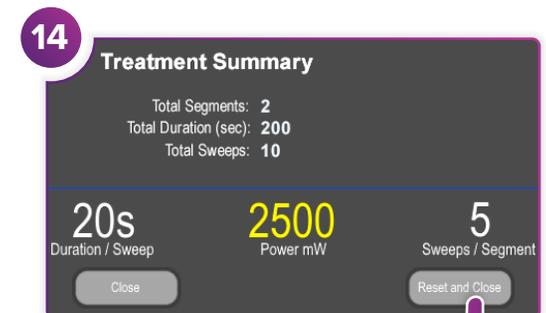

Restablezca los valores para el siguiente tratamiento.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com
 © 2022 Iridex. Todos los derechos reservados. Iridex, el logotipo de Iridex, MicroPulse, MicroPulse P3 y Cyclo G6 son marcas registradas de Iridex.
 88305-ES.A 02/2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 Países Bajos

