


Кратко ръководство: Използване на лазера Cyclo G6® със софтуер за управление на прокарването и изделие за доставяне MicroPulse P3®*




Завъртете ключа на **ON** (ВКЛ.). Изчакайте инициализирането да завърши. Свържете сондата MicroPulse P3.

4 **Задаване на параметри за лечение**
Задайте параметрите чрез Preset Menu (Меню с предварително зададени настройки) или чрез ръчно въвеждане.

Опция с предварително зададени настройки

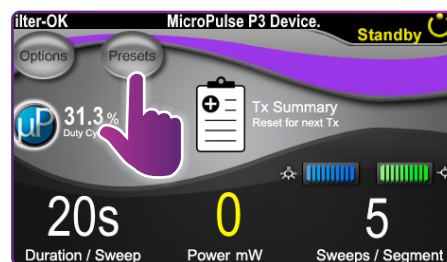


Опция с ръчни настройки

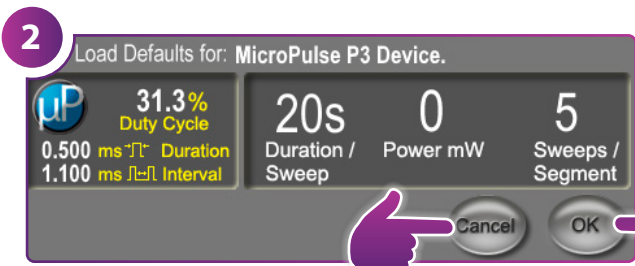

Изберете **OK**, за да зададете нови параметри. Ще се появи изскачаш прозорец (стъпка 3).

Изберете **CANCEL** (ОТМЯНА), за да запазите параметрите, използвани в предишно лечение. Ще се появи изскачаш прозорец (стъпка 3).

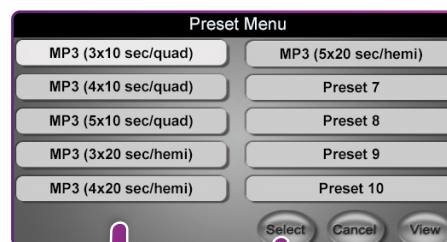


ВИЖТЕ ОЩЕ СЪПКИ НА ЗАДНАТА СТРАНИЦА




Натиснете **OK**. За да зададете нови параметри, преминете към стъпка 4.
За да запазите вашите параметри, преминете към стъпка 5.



* Преди доставяне на лечение направете справка с „Ръководство на потребителя: Надстройка на софтуер Cyclo G6 за ТЛТ с MicroPulse“, „Ръководство за оператора за лазерна система Cyclo G6“ и „Инструкции за употреба за изделие за доставяне MicroPulse P3“ за инструкции за доставяне, включително безопасност, предупреждения и сигнали за внимание.

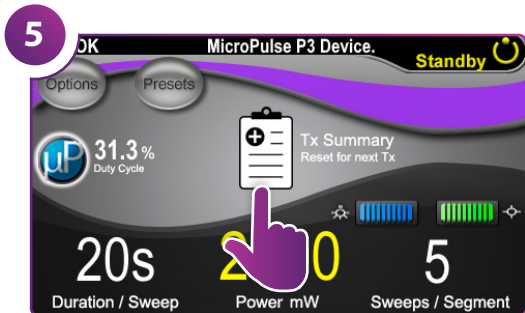

Изберете „Tx Summary“ (Обобщение на лечението).

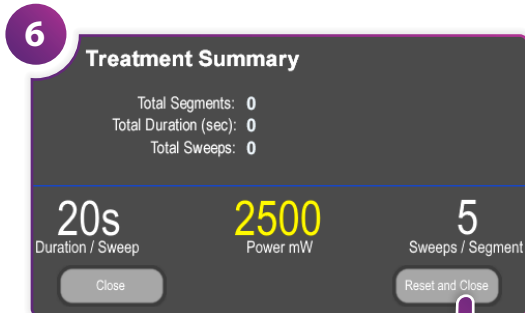


Потвърдете, че стойностите на „Total Segments“ (Общо сегменти), „Total Duration“ (Общо описание) и „Total Sweeps“ (Общо преминавания) са нулирани.




Натиснете този бутон, за да влезете в режим Treat (Лечение) (активиране на лазера).





При завършване на лечението натиснете този бутон, за да влезете в режим Standby (Готовност) (деактивиране на лазера).

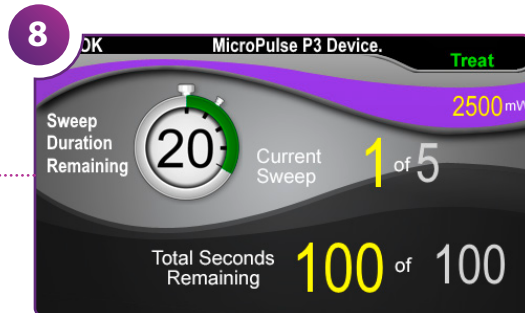

Доставете лечението до желания сегмент.

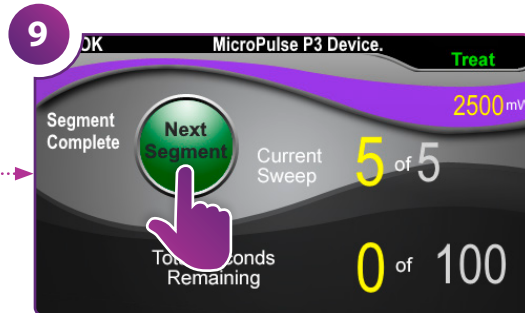

Натиснете, за да нулирате стойностите. За да лекувате следващия сегмент, повторете стъпка 8. Когато лечението бъде завършено, продължете към стъпка 10.

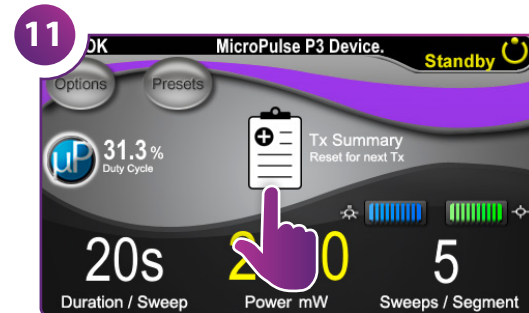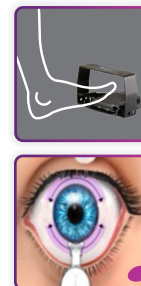


Натиснете, за да прегледате обобщението на лечението.



Прегледайте обобщението на лечението.



Регистрирайте информация за лечението.

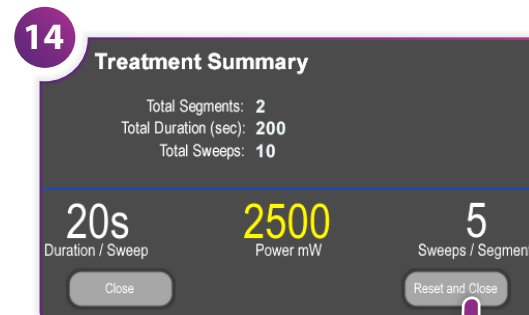

Нулирайте за следващото лечение.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com
 © 2022 Iridex. Всички права запазени. Iridex, логото на Iridex, MicroPulse, MicroPulse P3 и Cyclo G6 са регистрирани търговски марки на Iridex.
 88305-BG.A 02.2022 г.



CE 2797

EC REP

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 Нидерландия

