


Rychlý průvodce: Použití laseru Cyclo G6® se softwarem Sweep Management a zařízením pro cílení laserového paprsku MicroPulse P3®*




Otočte klíčem do polohy „ON“ (Zapnuto). Vyčkejte na dokončení inicializace. Připojte sondu MicroPulse P3.

4 **Nastavení parametrů léčby**
Parametry nastavte prostřednictvím nabídky Preset (Přednastavení) nebo ručně.

Možnost Přednastavení

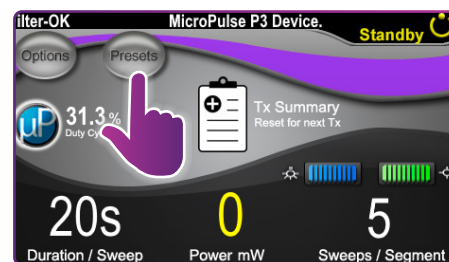


Možnost Ručně

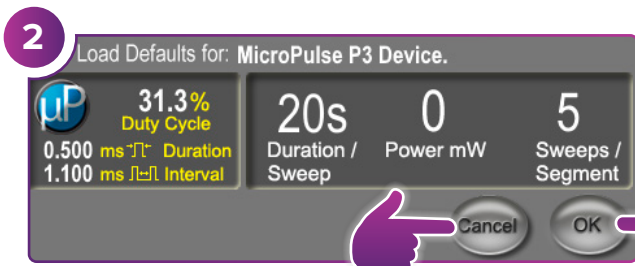


Stisknutím tlačítka „OK“ nastavíte nové parametry. Zobrazí se vyskakovací okno (krok 3).

Chcete-li zachovat parametry použité při předchozí léčbě, stiskněte tlačítko „CANCEL“ (Zrušit). Zobrazí se vyskakovací okno (krok 3).

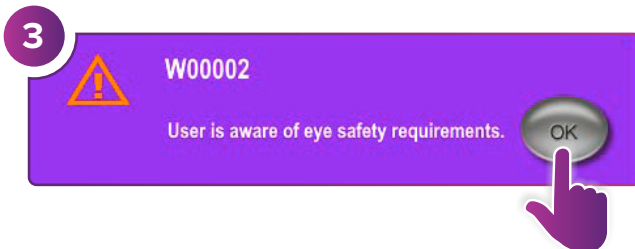


Stiskněte tlačítko „OK“. Chcete-li nastavit nové parametry, přejděte ke kroku 4. Chcete-li parametry zachovat, přejděte ke kroku 5.

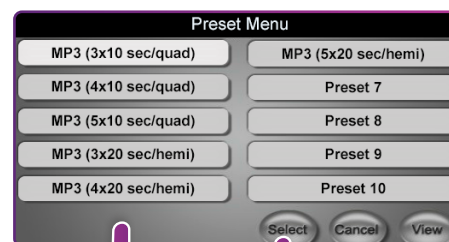


DALŠÍ KROKY NAJDETE NA ZADNÍ STRANĚ



* Před ošetřením si prostudujte tyto dokumenty: „Uživatelská příručka: Aktualizace softwaru Cyclo G6 pro MicroPulse TLT“, „Příručka pro uživatele laserového systému Cyclo G6“ a „Návod k použití zařízení pro cílení laserového paprsku MicroPulse P3“, kde jsou uvedeny pokyny k provádění ošetření, včetně bezpečnostních pokynů, varování a upozornění.

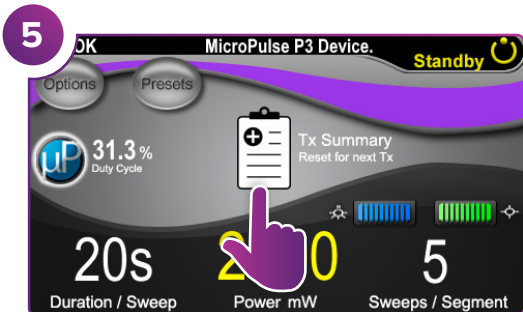


Stiskněte tlačítko „Tx Summary“ (Shrnutí léčby).

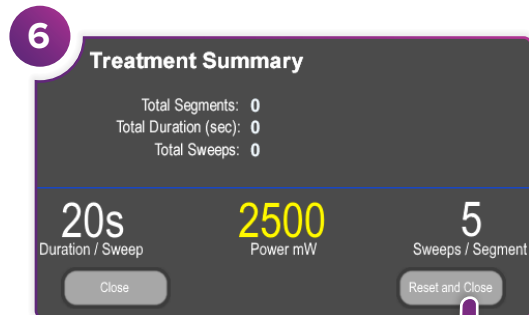


Potvrďte, že byly hodnoty „Total Segments“ (Celkový počet segmentů), „Total Duration“ (Celková doba trvání) a „Total Sweeps“ (Celkový počet oblouků) vynulovány.



Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu Treat (Léčba; aktivace laseru).

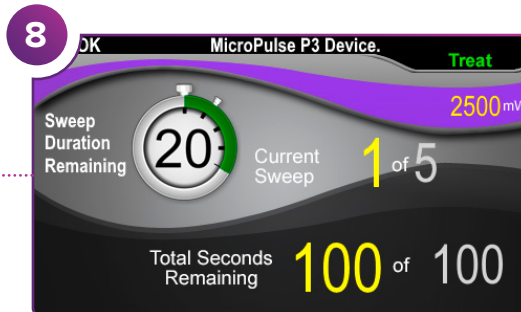


Provedte ošetření požadovaného segmentu.

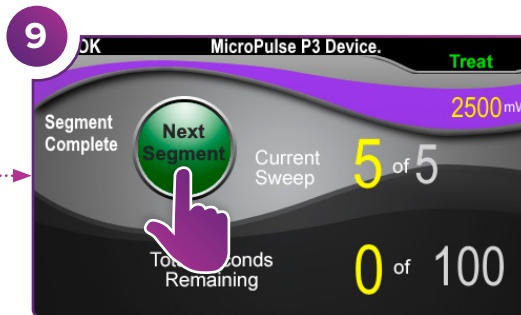


Stisknutím vynulujte hodnoty. Chcete-li ošetřit další segment, opakujte krok 8. Po dokončení ošetření pokračujte krokem 10.




Po dokončení léčby stisknutím tohoto tlačítka přejdete do režimu Standby (Pohotovostní; deaktivace laseru).

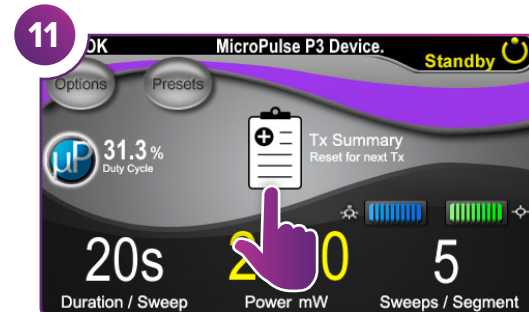


Po stisknutí se zobrazí shrnutí léčby.

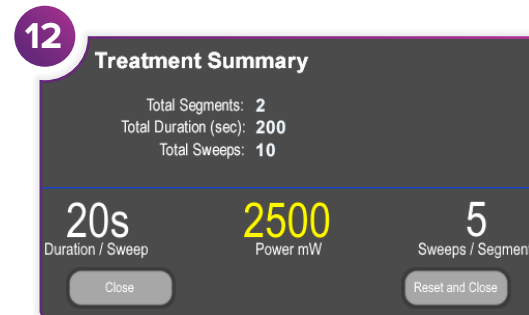

Zobrazení shrnutí léčby.

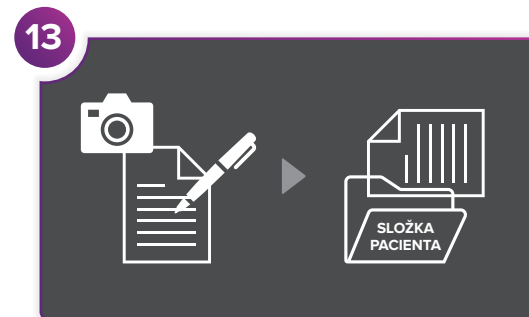

Zaznamenejte informace o léčbě.

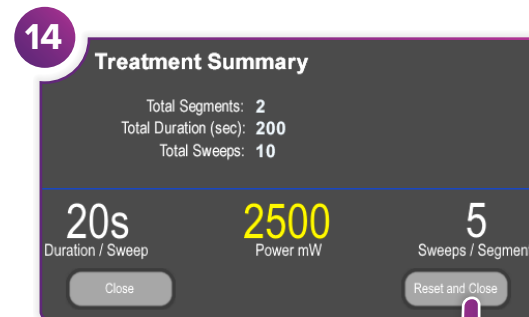

Vynulování pro další ošetření.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com
 © 2022 Iridex. Všechna práva vyhrazena. Iridex, logo Iridex, MicroPulse, MicroPulse P3 a Cyclo G6 jsou registrované ochranné známky společnosti Iridex. 88305-CS.A 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe
 Prinsessegracht 20
 2514 AP The Hague
 Nizozemsko

