


Σύντομος οδηγός: Χρήση του λέιζερ Cyclo G6® με το λογισμικό διαχείρισης σάρωσης και τη συσκευή παροχής* MicroPulse P3®




1
Γυρίστε το κλειδί στη θέση «ON» (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση. Συνδέστε τη συσκευή παροχής MicroPulse P3.

4
Ρύθμιση παραμέτρων θεραπείας
Ορίστε τις παραμέτρους χρησιμοποιώντας το Preset Menu (Μενού προεπιλογών) ή με μη αυτόματη καταχώριση.

Προεπιλογή

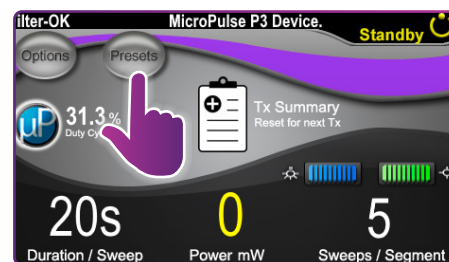


Μη αυτόματη επιλογή

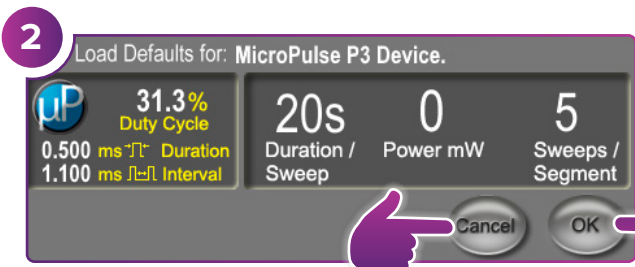

2
Επιλέξτε «OK» για να ορίσετε νέες παραμέτρους. Θα εμφανιστεί μια αναδυόμενη οθόνη (βήμα 3).

Επιλέξτε «CANCEL» (ΑΚΥΡΩΣΗ) για να διατηρήσετε τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν στην προηγούμενη θεραπεία. Θα εμφανιστεί μια αναδυόμενη οθόνη (βήμα 3).

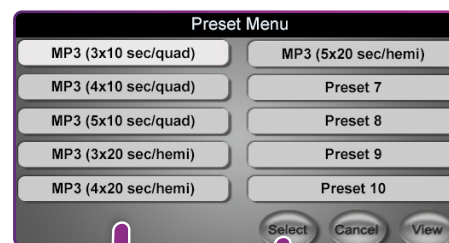

ΒΛ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΙΣΩ ΣΕΛΙΔΑ




3
Πατήστε «OK». Για να ορίσετε νέες παραμέτρους, προχωρήστε στο βήμα 4.


Για να διατηρήσετε τις παραμέτρους σας, προχωρήστε στο βήμα 5.




* Πριν από την εφαρμογή θεραπείας, ανατρέξτε στον «Οδηγό χρήστη: Αναβάθμιση λογισμικού Cyclo G6 για την MicroPulse TLT», στο «Εγχειρίδιο χειριστή του συστήματος λέιζερ Cyclo G6» και στις «Οδηγίες χρήσης συσκευής παροχής MicroPulse P3» για οδηγίες παροχής θεραπείας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ασφάλειας, προειδοποιήσεων και συστάσεων προσοχής.

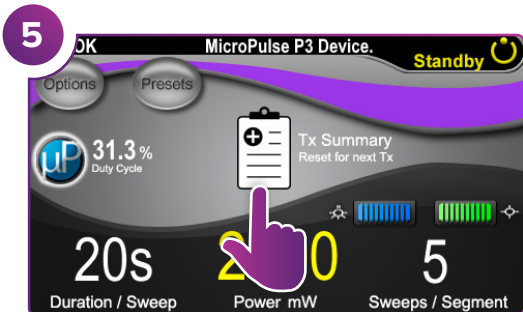


Επιλέξτε «Tx Summary».

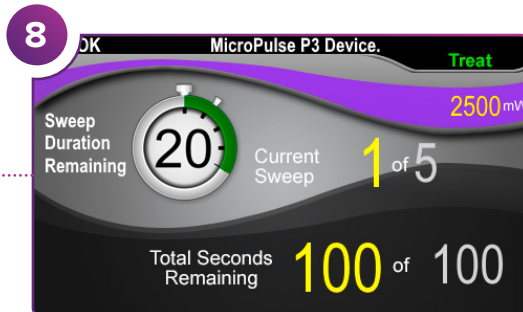


Εφαρμόστε θεραπεία στο επιθυμητό τμήμα.

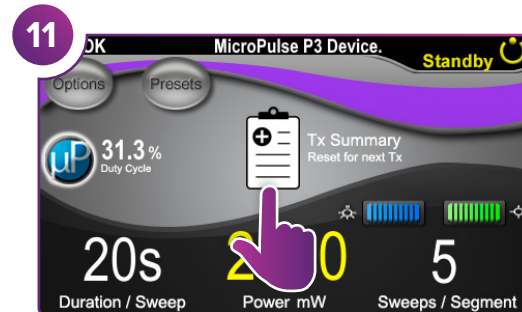


Πατήστε για να προβάλετε τη σύνοψη θεραπείας.

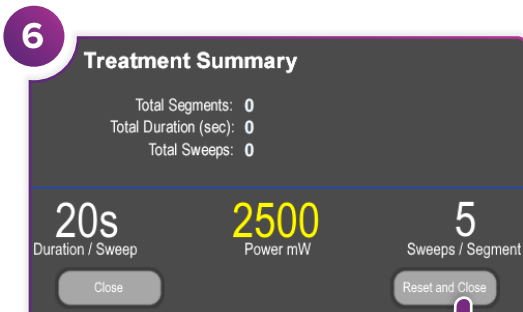

Επιβεβαιώστε ότι οι τιμές «Total Segments» (Συνολικά τμήματα), «Total Duration» (Συνολική διάρκεια) και «Total Sweeps» (Συνολικές σαρώσεις) έχουν μηδενιστεί.

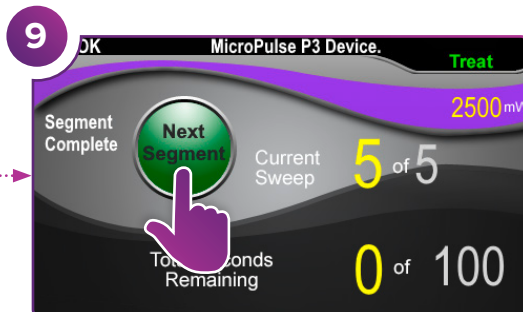

Πατήστε για να μηδενίσετε τις τιμές. Για να εφαρμόσετε θεραπεία στο επόμενο τμήμα, επαναλάβετε το Βήμα 8. Όταν η θεραπεία ολοκληρωθεί, συνεχίστε στο Βήμα 10.

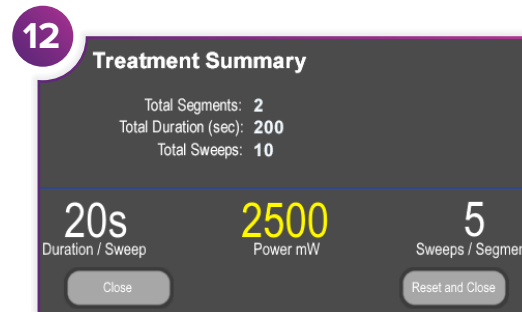


Ελέγξτε τη σύνοψη θεραπείας.




Πατήστε αυτό το κουμπι για να εισέλθετε στον τρόπο λειτουργίας Treat (Θεραπεία) (ενεργοποίηση λείζερ).



Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, πατήστε αυτό το κουμπι για να εισέλθετε στον τρόπο λειτουργίας Standby (Αναμονή) (απενεργοποίηση λείζερ).

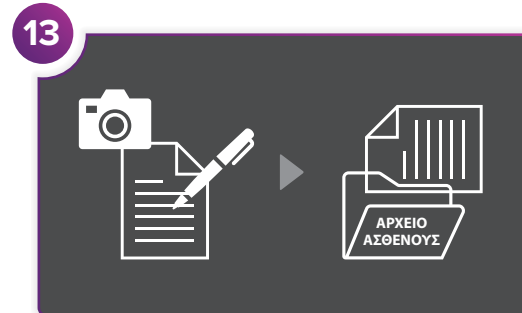

Καταχωρίστε πληροφορίες θεραπείας.

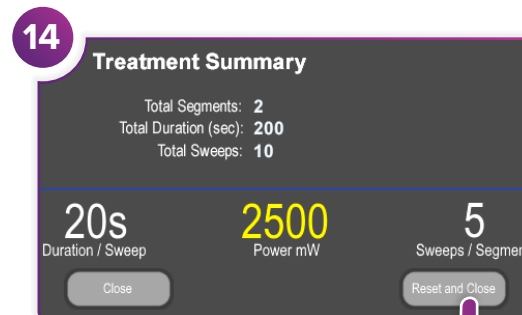

Μηδενίστε για την επόμενη θεραπεία.



Iridex • info@iridex.com • iridexglaucoma.com
© 2022 Iridex. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία Iridex, το λογότυπο Iridex και οι ονομασίες MicroPulse, MicroPulse P3 και Cyclo G6 είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Iridex. 88305-ELA 02.2022



CE 2797

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
Κάτω Χώρες

